

取扱説明書

コメット美顔器 Cosmic 303/313



コスミックスタンド(別売)

ご使用のまえに、この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。取扱説明書は、いつもお手元に置いてご使用ください。

Comet®

はじめに

警告シンボル・シグナル用語について

この取扱説明書および、コスミック本体とコスミックスタンド（別売）に貼付されている警告ラベルには、危険を明確に示すための、△という警告シンボルと、「危険」「警告」「注意」という3つのシグナル用語を使っています。シグナル用語の種類により危険の大きさと内容が異なります。

警告シンボルとシグナル用語の意味は以下のとおりですので、警告シンボル表記部分は製品ご使用のまえに注意深くお読みになり正しく理解してください。

**危険**

取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が高い危険状況を示します。

**警告**


取扱いを誤った場合、重傷を負う可能性がある危険状況を示します。

**注意**

取扱いを誤った場合、軽傷または中程度の障害を負う可能性がある危険状況を示します。また、物的損害のみの発生が予測されるときにも使用します。

警告ラベルについて

コスミック本体とコスミックスタンドには危険に対する情報を記載した警告ラベルを、下図の位置に貼付しています。

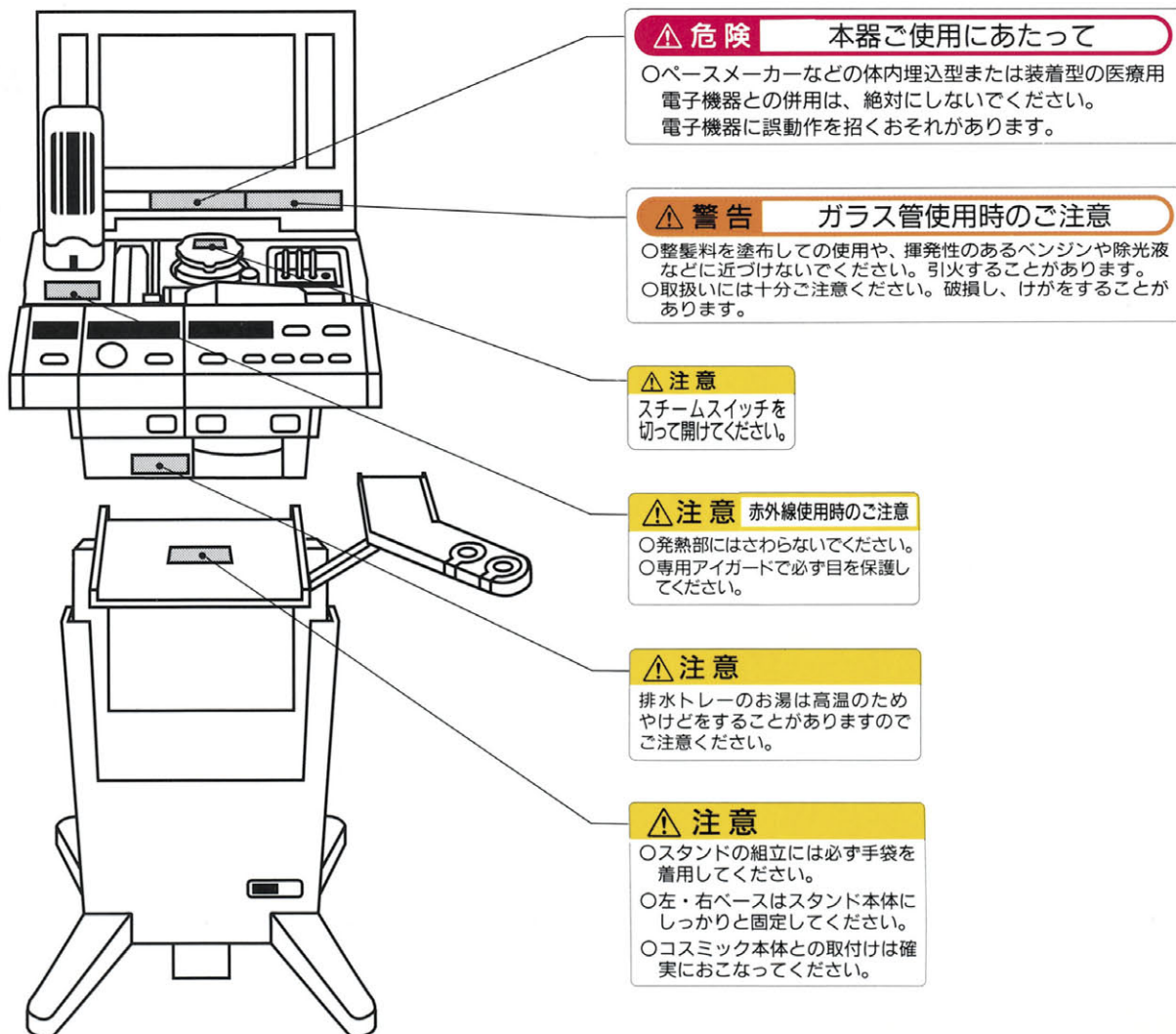

もくじ	ページ
ご使用のまえに ●安全のために必ずお守りください	2~3 ●
各部のなまえと機能 ●コスミック303/313本体 ●フロントパネル詳細 ●コスミックスタンド(別売)	4~6 ●
コスミックスタンド(別売)の組立・取付け・調節 ●組立方法 ●コスミック本体との取付け方法 ●高さ調節方法	7 ●
安全にご使用いただくために 取扱い上の注意 ●電源 ●電源コード・電源プラグ ●タンクの注水と排水 ●スチーマー・タンクフタ ●ガラス管 ●赤外線 ●改造の禁止	8~9 ●
ご使用まえの準備 ●本器のセット ●タイマーセット	10 ●
ご使用方法	
スチームステップ	11~13 ●
テスラーステップ	14~15 ●
クリーナーステップ	16~17 ●
赤外線ステップ	18~19 ●
全ステップ終了後には…	19 ●
本器のお手入れ・部品交換・その他 ●本器のお手入れ ●部品交換 ●交換部品の寿命目安 ●保管 ●アフターサービス ●点検 ●廃棄	20~23 ●
こんなときには… Q & A	24~25 ●
スキンタイプチャート<肌質判定チャート>	26~27 ●
お手入れチャート	
超敏感肌用	28~29
敏感肌用 フルコース/シンプルコース	30~31
混合肌用 フルコース/シンプルコース	32~33
乾性肌用 フルコース/シンプルコース	34~35
脂性肌用 フルコース/シンプルコース	36~37
普通肌用 フルコース/シンプルコース	38~39
妊娠中の方用 フルコース/シンプルコース	40~41
仕様・価格	42

安全のために必ずお守りください

⚠ 危険 次のような医療用電子機器との併用は、電子機器に誤動作を招くおそれがありますので絶対に使用しないでください。

- ペースメーカーなどの体内埋込型医療用電子機器
- 心電計などの装着型医療用電子機器

⚠ 警告 ■何らかの病気で通院加療中の方、持病のある方、体内に金属などを使用している方は、必ず専門医に、この美顔器によるお手入れについてご相談のうえご使用ください。

■本器はお顔のお手入れをする美顔器です。治療目的としての使用は絶対にしないでください。

⚠ 注意 ■お子様には使用しないでください。

■肌質によりお手入れ方法が異なります。ご使用のまえにP.26の「スキントイプチャート」によりご自分の肌質をお選びのうえ、P.28からの各肌質別「お手入れチャート」に記載されている使用時間・使用回数・使用方法をよく守り、使いすぎないようにご注意ください。

- 体調が悪いときは皮膚も敏感になっていますので、美顔器によるお手入れをお休みするか、敏感肌用のお手入れコースでご使用ください。
- 肌質を選べなかったり肌質がわからない場合は無理にご使用にならず、販売店またはフヨーフリーダイヤルへお問い合わせください。

■妊娠中の方はお手入れチャートP.40の「妊娠中の方用」コースでご使用ください。

■皮膚に炎症（日焼け・赤み・ブツブツ・かゆみなど）があるときはこの美顔器を使用しないでください。


■皮膚の弱い方、アレルギー体質の方は無理をせず、販売店またはフヨーフリーダイヤルへご相談のうえご使用ください。

■本器ご使用中、皮膚に異常を感じたときは、ただちに使用を中止し、販売店またはフヨーフリーダイヤルへご相談ください。

フヨーフリーダイヤル ☎ 0120-240-114

本体の持ち方について

⚠ 注意 本器を持つときは、本体のフタを閉め、本体両側面下のすべり止め部分に両手をあててお持ちください。他の箇所を持ちますと不安定で落とす場合があり、足などをけがしたり故障の原因となります。(本器重量は約10kg)

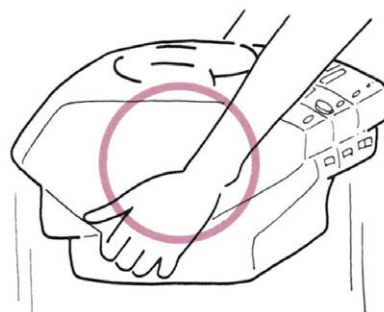

設置について


⚠ 注意 水平な場所でご使用ください。

●ぐらついた台の上や傾いたところは、落ちたり倒れたりして危険です。




⚠ 注意 コスミックスタンド(別売)はキャスターがしっかり安定する床に設置し、キャスターのストッパーを赤い帯が出ている「止る」の状態にしてご使用ください。

●床が不安定だったり、ストッパーが「動く」の状態になっていると、倒れたりして危険です。

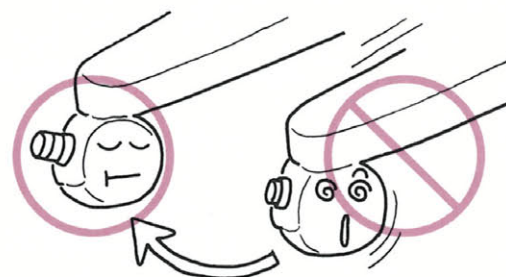

⚠ 注意 湿気・ほこりのあるところや極端に温度の高いところをさけてご使用ください。

●お風呂場や洗濯機のそばなど、水のかかる場所、湿気・湯気・ほこりの多い場所やストーブのそばなどに置きますと、故障したり火災の原因となります。

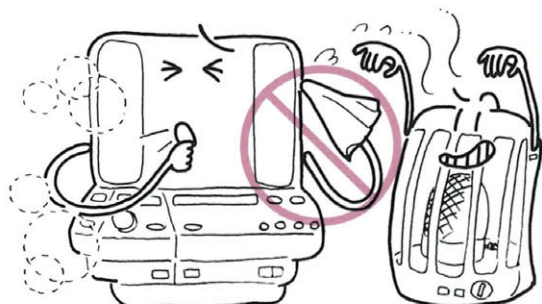



⚠ 注意 テレビ・ラジオその他周辺の機器から1メートル以上離れてご使用ください。

●放電しているガラス管を、周辺の機器に接触させたり間近で使用しますと、機器が誤動作することがあります。なお、1メートル以上離れても周辺の機器に雑音が入る場合がありますが、影響はありません。




各部のなまえと機能


コスミック303/313本体

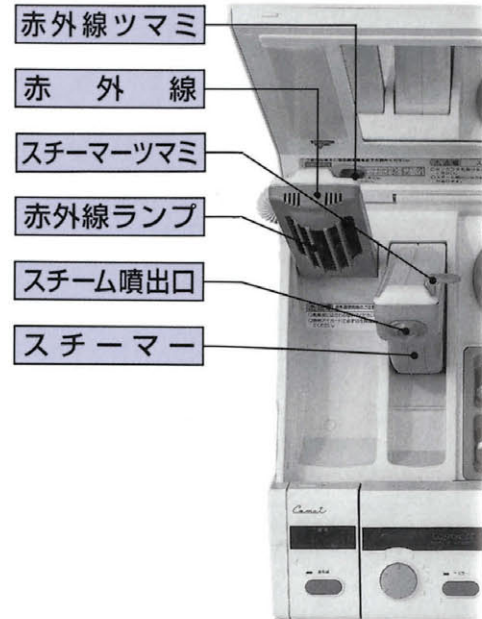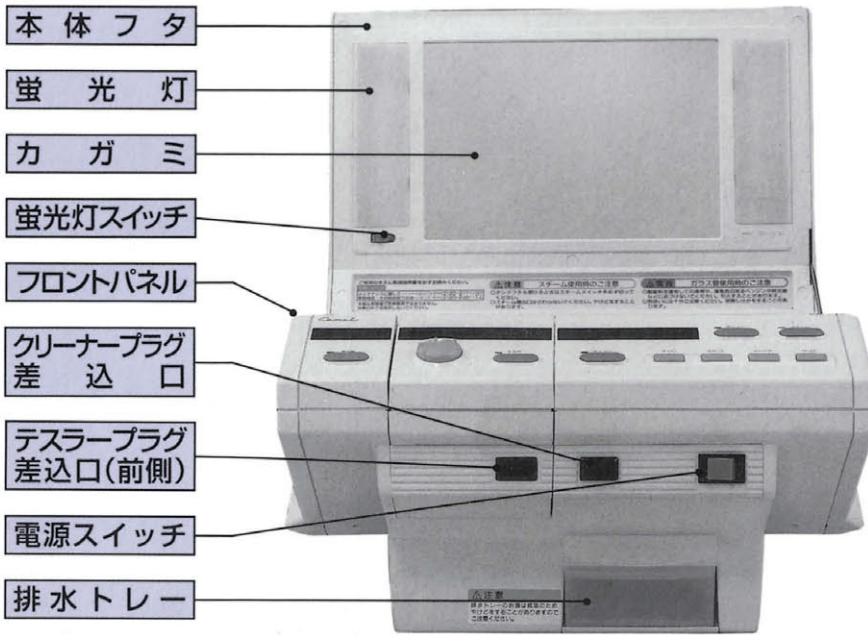

各部のなまえと機能

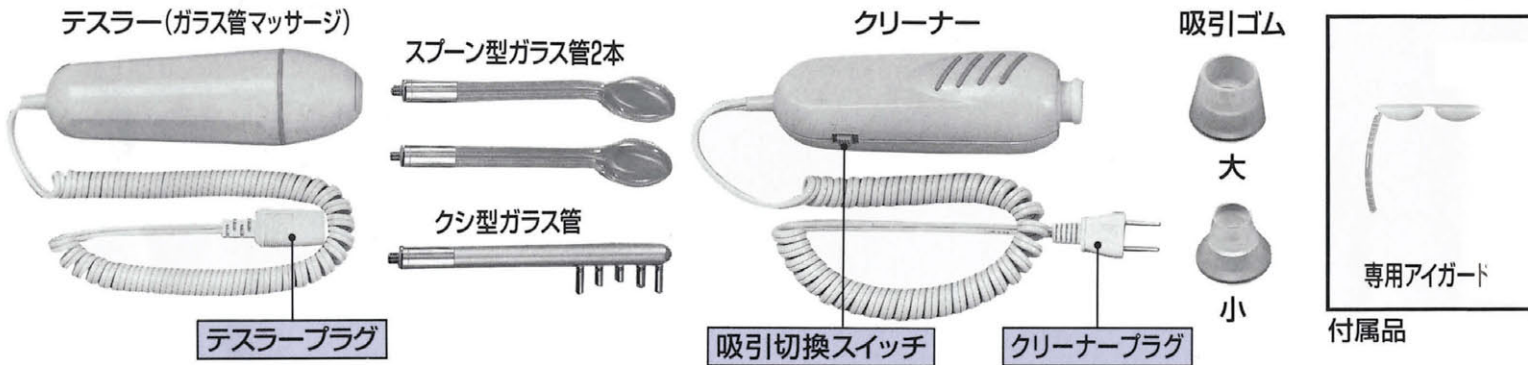

フロントパネル詳細

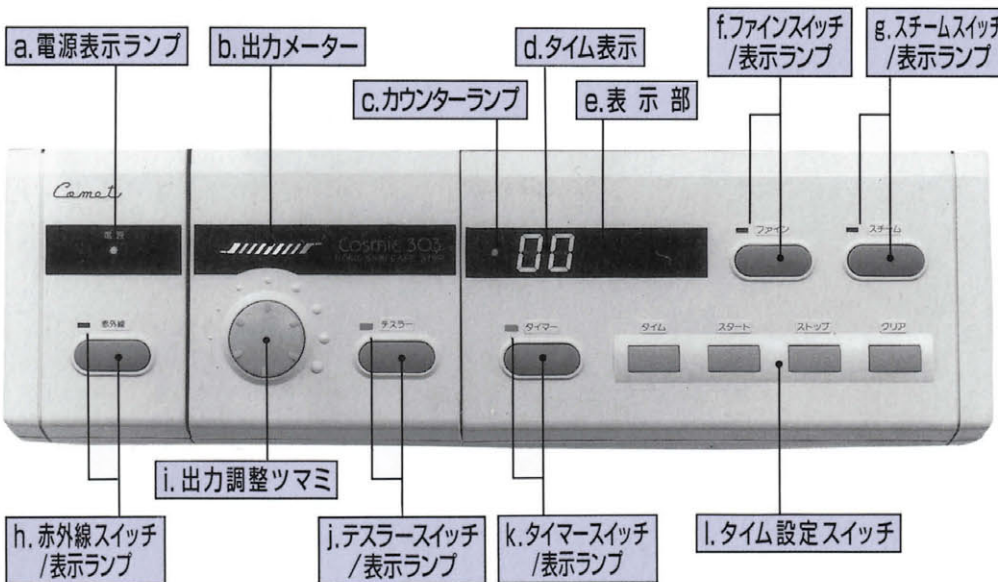

a. 電源表示ランプ

電源スイッチを入れたとき、電源表示ランプが点灯します。

b. 出力メーター




テスラーの出力を表示します。

c. カウンターランプ

カウントが始まると点滅します。

d. タイム表示

設定時間(分)を表示します。

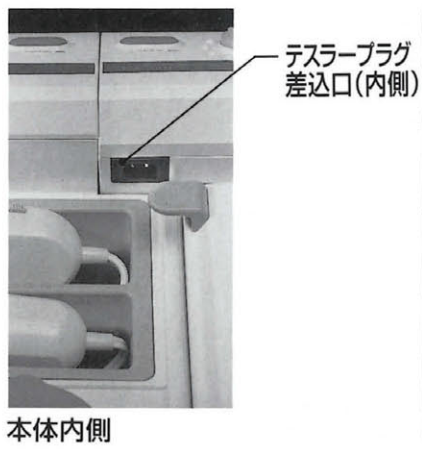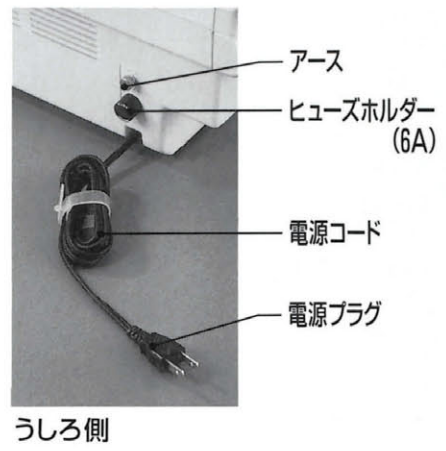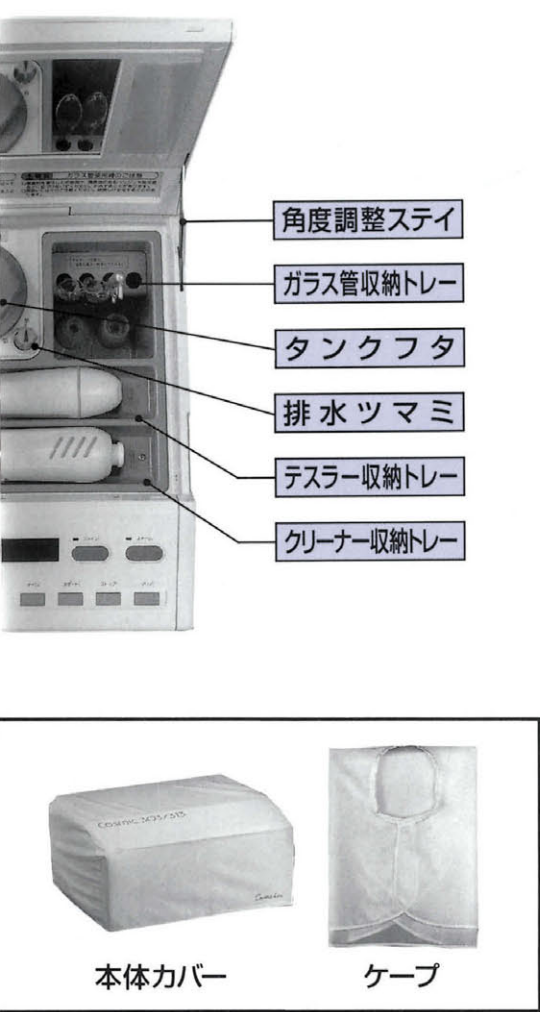

e. 表示部

各表示は次のときに3回点滅表示されます。その場合スチームスイッチが入りません。
(くわしくはP.12/P.18をご参照ください)

- 水量不足 —— タンクの水量が不足の状態ですチームスイッチを押したとき。
使用中に水量が不足したとき。
- 水量過多 —— タンクの水位ラインを越えて水が入っている状態でスチームスイッチを押したとき。
- ノズル確認 —— スチーマーが使用範囲外の位置にある状態でスチームスイッチを押したとき。
スチーマーが起きた状態で赤外線を起こし赤外線スイッチを押したとき。
(この場合は赤外線スイッチが入りません)

f. ファインスイッチ/表示ランプ

ファインスイッチを入れたとき、表示ランプが点灯します。

g. スチームスイッチ/表示ランプ

スチームスイッチを入れたとき、表示ランプが点灯します。

h. 赤外線スイッチ/表示ランプ

赤外線スイッチを入れたとき、表示ランプが点灯します。

i. 出力調節ツマミ

テスラーの出力を調節します。

j. テスラースイッチ/表示ランプ


テスラースイッチを入れたとき、表示ランプが点灯します。

k. タイマースイッチ/表示ランプ

タイマースイッチを入れたとき、表示ランプが点灯します。
タイマーの操作方法はP.10をご参照ください。

l. タイム設定スイッチ

コスミックスタンド(別売)

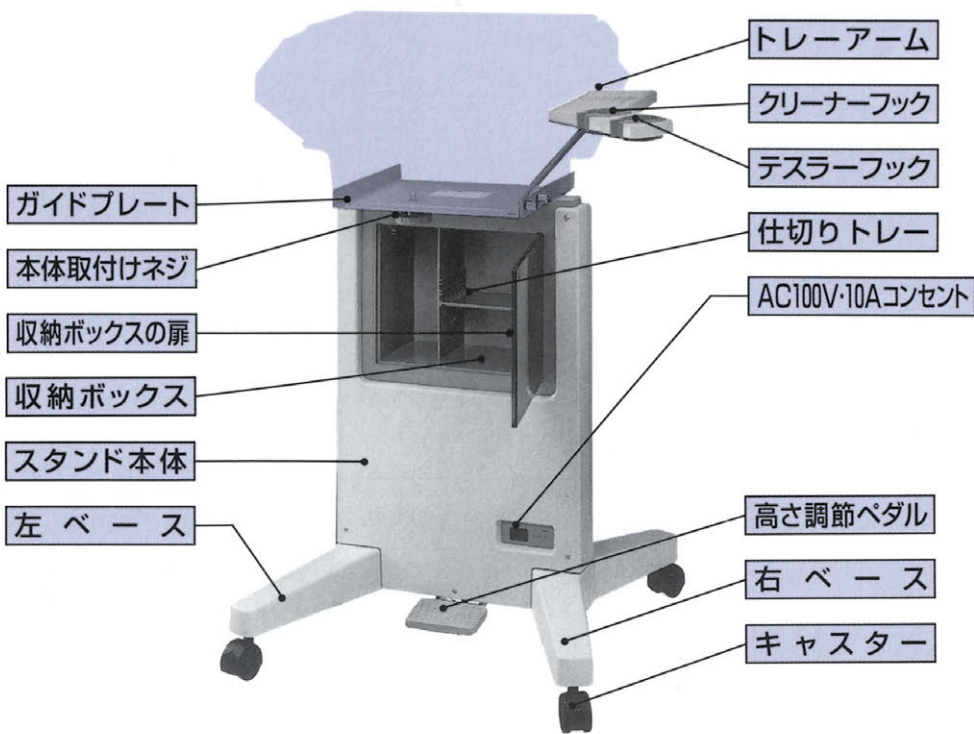

部品・付属品

うしろ側

AC100V・10Aコンセント


コスミック本体をスタンドに取付けてご使用の際は、スタンドうしろ側のAC100V・10Aコンセントに、コスミック本体の電源プラグを差し込んでください。

ヒューズホルダー(10A)

スタンド電源コード

スタンド電源プラグ

家庭用電源をご使用ください。

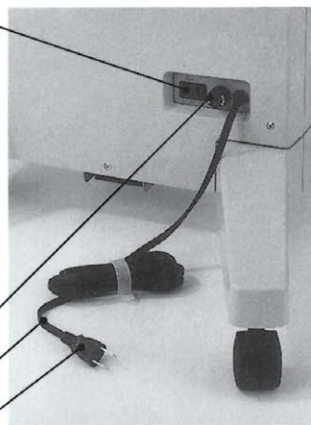


ストッパー

赤い帯が出ている状態でキャスターが止まります。

ストッパー

赤い帯がかくれるまで押しすと、キャスターが動きます。

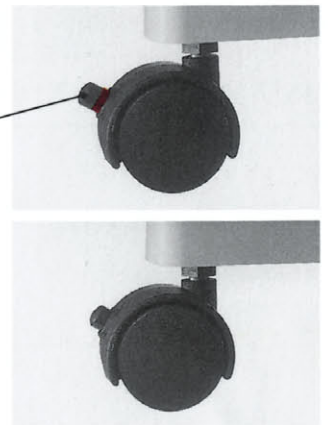

収納ボックス

収納ボックスの扉は左上部を押すと開閉できます。



収納ボックス内部の仕切りトレイは、ご使用に合わせて高さを3段階調節できます。




コスミックスタンド(別売)の組立・取付け・調節

⚠ 注意


コスミックスタンドの組立やコスミック本体との取付けは、必ず手袋を着用し手を保護してください。

組立方法


1 スタンド本体を、収納ボックスの扉を手前に向けて、ガイドプレートが下にくるように置いてください。

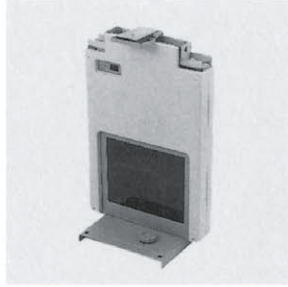

3 ベース中央の穴にボルトを差し込み、スパナでスタンド本体にしっかりねじ込んで取付けます。同様にもう片方のベースも取付けます。

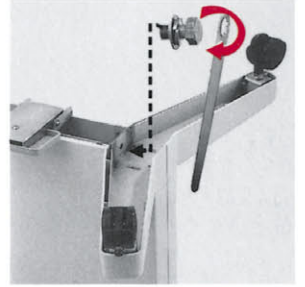

2 片方のベースをストッパーのついているキャスターが手前になるように持ち、スタンド本体のツメにひっかけてのせてください。

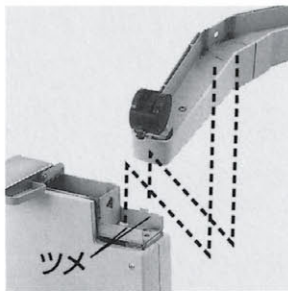

4 スタンド本体をガイドプレートが上になるように立て直します。



コスミック本体との取付け方法

コスミック本体底部のゴム足を、ガイドプレートの4カ所の穴にセットし、穴からゴム足が出ていることを確認してから、コスミック本体取付けネジを締めてください。




⚠ 注意

ゴム足がガイドプレートの4カ所の穴に確実にセットされないと、本体が傾いたり倒れたりして危険です。

高さ調節方法


スタンドの高さは、約10cmの範囲で調節できます。コスミック本体のフタを閉め、高さ調節ペダルを踏みながら、コスミック本体両側面下のすべり止め部分に両手をあてます。

上げたいときは持ち上げるように、下げたいときは押し下げるようにしてください。

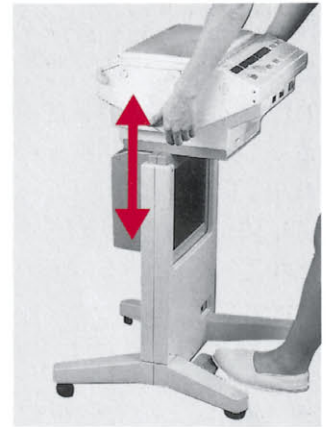


トレーアーム

トレーアームの取付けはコスミック本体をスタンドに取付けた後、トレーアームの穴にガイドプレート右側面手前のネジを合わせ、付属の化粧ネジでしっかりと取付けてください。

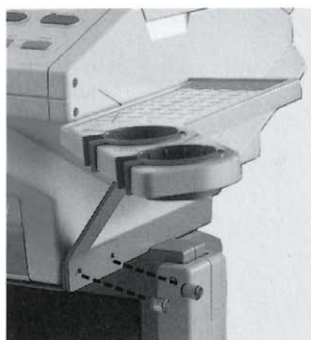


クリーナーはクリーナーフックを、テスラーはテスラーフックをご利用ください。

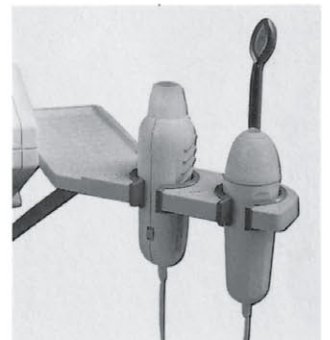

電 源


家庭用電源 (AC・100V) でご使用ください。
コスミック303は専用アダプター (AC・24V) を使用してください。

- ⚠ 注意** ほかの電源でのご使用は、故障・火災などの原因となります。

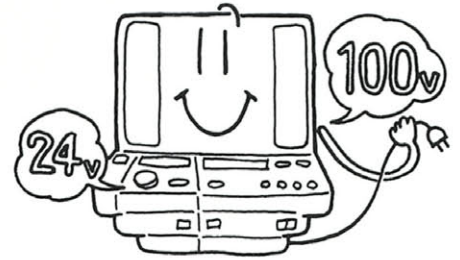



電源コード・電源プラグ

- ⚠ 注意**
- 電源コードを無理に折り曲げたり、引っばったり、継ぎ足すなどの加工はしないでください。
 - 電源コードをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。
 - 電源コードの破損、プラグの接触不良にお気づきの際は、直ちに使用を中止し、販売店またはコメントフリーダイヤルへご連絡ください。

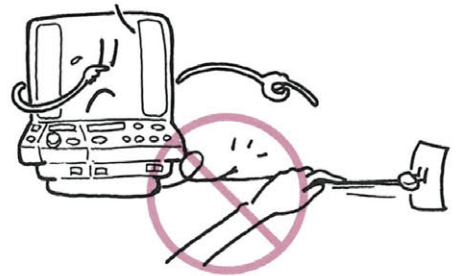

タンクの注水と排水

- ⚠ 注意**
- スチームスイッチが入っている状態 (スチーム表示ランプが点灯) で、水位ラインを越えてタンクに注水しないでください。
スチーム噴出口から湯滴が出てやけどをすることがあります。
 - タンクには水またはお湯以外のものは入れないでください。
やけどや故障の原因となります。
 - タンク内の排水はご使用後毎回おこなってください。
毎回排水をしないでご使用をつづけると、タンク内の排水口などがつまり、スチーム噴出口から湯滴が出てやけどをしたり、故障の原因となります。
 - 排水トレイのお湯を捨てる際は注意してください。
高温のためやけどをすることがあります。

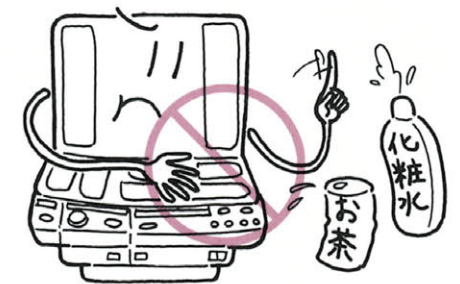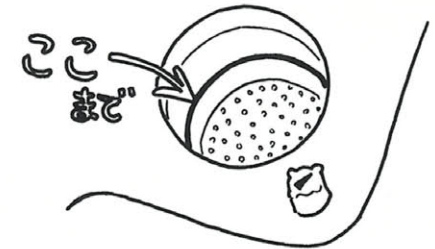

スチーマー・タンクフタ

- ⚠ 注意** ■スチーマーの使用中には、スチーム噴出口をさわらないでください。
高温でやけどをすることがあります。






安全にご使用いただくために

■スチーマーの使用中には、スチーマーの角度を変えないでください。
スチーム噴出口から湯滴が出てやけどをすることがあります。

■スチーマーの使用直後は、タンクフタを開けないでください。
熱湯でやけどをすることがあります。

■スチーム噴出口がつまるなどでタンク内が過圧すると、安全機能が作動しタンクフタ側面から蒸気が出ます。その場合には、やけどをすることがありますのでタンクフタにはさわらずすぐに電源スイッチを切り、販売店またはコメットフリーダイヤルへご連絡ください。

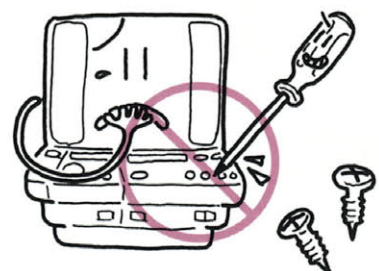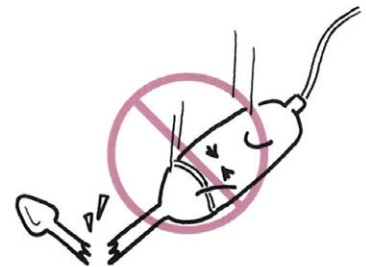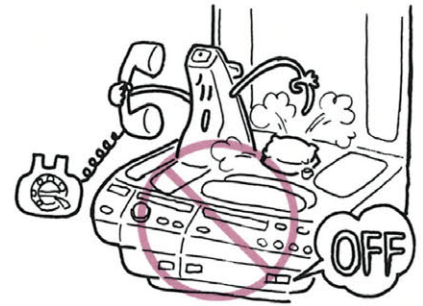

ガラス管

⚠ 警告

揮発性の高い整髪料などを塗布してガラス管マッサージをおこなったり、放電させているガラス管をベンジンや除光液などの揮発性の高いものに絶対に近づけないでください。

放電しているガラス管が、揮発性の高いものに触れると引火し、やけどや火災の原因となります。

⚠ 注意

■ガラス管を落としたり、ぶついたりしないでください。破損し破片が飛び散り、けがをすることがあります。落としたりぶついたりした際、使用可能な状態でも、ガラスの表面にひびが入っている場合があります。表面をよく確認しひびなどがありましたら、そのガラス管は使用しないでください。

■ガラス管は軽く滑らすようにマッサージしてください。強く押しつけると破損してけがをすることがありますので、十分ご注意ください。

赤外線

⚠ 注意

■赤外線ランプにさわらないでください。発熱部は高温でやけどをします。

■赤外線を紙・ビニール・布などで覆わないでください。過熱して焼損することがあります。

改造の禁止

⚠ 警告


本器を改造してのご使用は絶対におこなわないでください。

P.21の「部品交換」で指定した以外の内部には絶対に触れないでください。


ご使用まえの準備

本器のセット


1 本器を水平に置き、コスミック本体の電源プラグを、家庭用電源(AC・100V)のコンセントに差し込んでください。スタンドをご利用の場合は、P.6のコスミックスタンド「うしろ側」をご参照ください。

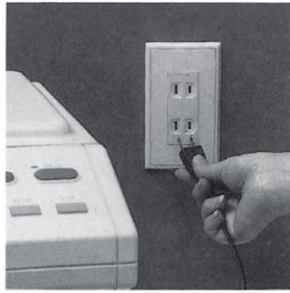


3 コスミック本体の電源スイッチを入れて、電源表示ランプが点灯するのを確認してください。

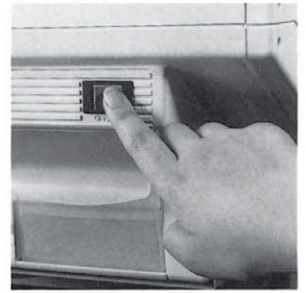

2 コスミック本体フタの両側に指をあて、止まる角度まで開けてください。フタの角度は2段階に調節できます。フタを持ち、角度調節ステイを下から軽く指で押しあげてください。

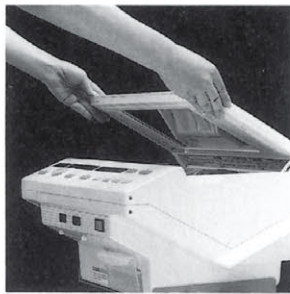


4 蛍光灯スイッチを入れて、蛍光灯がつくのを確認してください。蛍光灯スイッチは電源スイッチと連動していますので、電源を切ると自動的に消灯します。

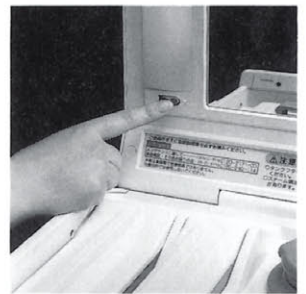


タイマーセット


各ステップでは、使用時間厳守のためタイマーを使用します。ステップに入るまえにあらかじめタイマーの操作方法をよく理解してください。

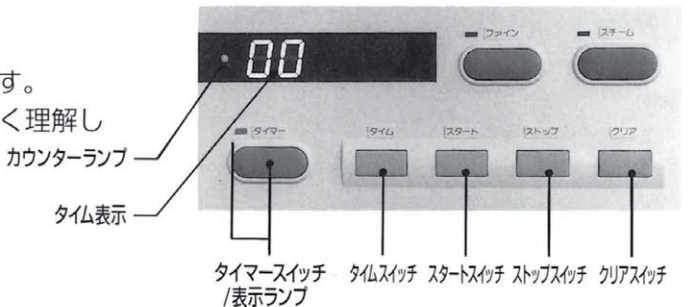


1 タイマースイッチを押して入れます。表示ランプが点灯し、タイム表示が「00」であることを確認してください。ほかの数字が表示された場合は、クリアスイッチを押して「00」に戻してください。「99」が表示された場合は、電源スイッチを一旦切り、再び入れてください。「99」の表示は、外来ノイズに対する機器保全機能であり、故障ではありません)

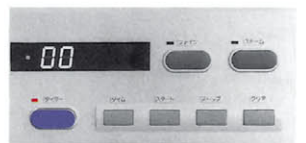


2 タイムスイッチを押して、使用時間を設定してください。タイムスイッチを1回押すごとに設定時間が1分ずつ長くなります。短くしたいときは、クリアスイッチを押してタイム表示を「00」に戻してから設定をやり直してください。

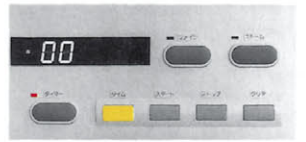

3 スタートスイッチを押すと、タイム表示が「00」に戻り、カウンターランプが点滅し、カウントを始めます。

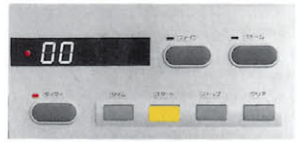

4 設定時間が経過しますとメロディーが流れます。ストップスイッチを押してください。

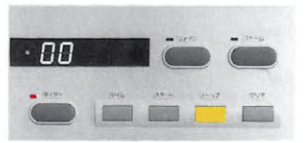

5 タイマーのご使用を終了するときは、クリアスイッチでタイム表示を「00」に戻し①、タイマースイッチを押して切ってください。(②表示ランプの消灯を確認してください) 電源スイッチを切りますと、タイマースイッチも自動的に切れます。




スチームステップ スチーマーのご使用方法

スチーム
お顔全体に微粒子の蒸気をあてます。

ご使用のまえにP.26の「スキントイプチャート」でご自分の肌質をお選びのうえ、P.28からの各肌質別「お手入れチャート」に記載されている使用時間・使用回数・使用方法を正しくお守りください。


スチーマーツマミを持ってスチーマーを起こしてください。最初に「カチッ」という音がして止まる位置からが使用範囲となり、上に4段階調節できます。お好みの位置にセットしてご使用ください。

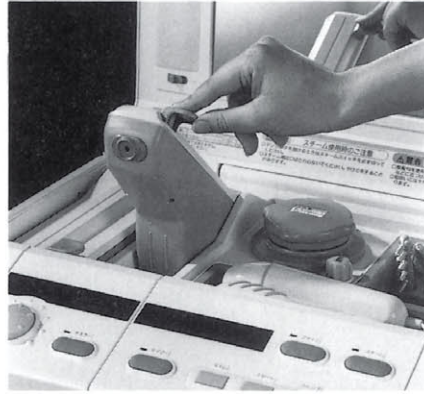

1


●使用範囲外ではスチームスイッチが入りません。

排水ツマミを右へ回して、「カチッ」と音がして矢印が「閉」を指し、排水コックが締まっていることを確認してください。

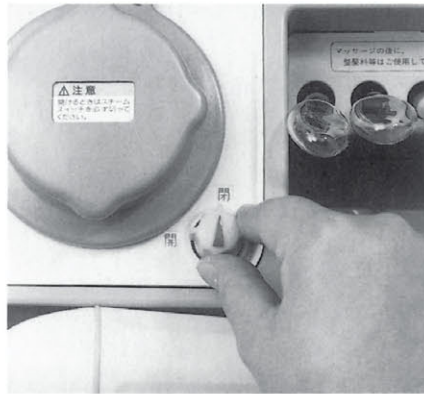


2

タンクフタをつかむように握り、フタの「▲」が本体の「開▼」に合うように左へ回して開けてください。

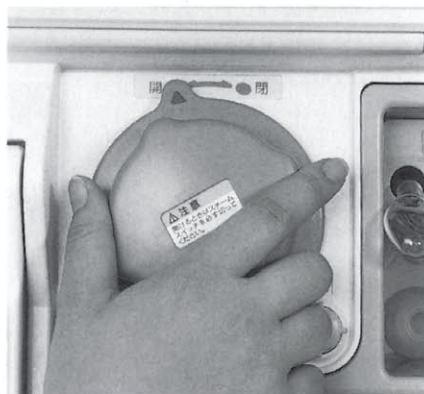

3

水またはお湯をタンク内部の水位ラインを越えないように入れてください。

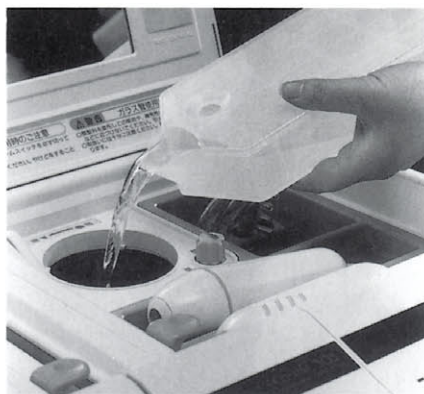

⚠ 注意 水位ラインを越えて注水しますとスチームスイッチが入らなかったり、スチーム噴出口より湯滴が出てやけどをすることがあります。


⚠ 注意 タンクに水またはお湯以外のものは入れないでください。やけどや故障の原因となります。

4

●注水には排水トレーをご利用いただけます。

5


タンクフタの「▲」を、まず本体の「開▼」に合わせてフタをはめてから、「●閉」に合うように右へ回して閉めてください。

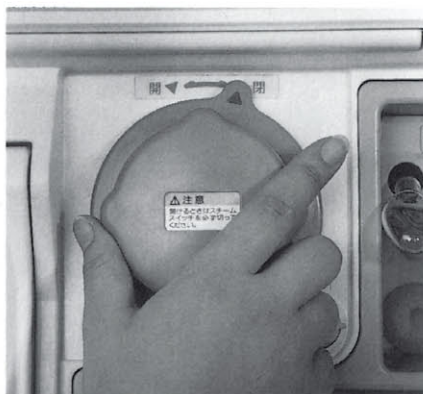

△注意 蒸気漏れの危険がありますので、タンクフタはしっかりと締めてください。

6

スチームスイッチを押して入れてください。(表示ランプの点灯を確認してください)

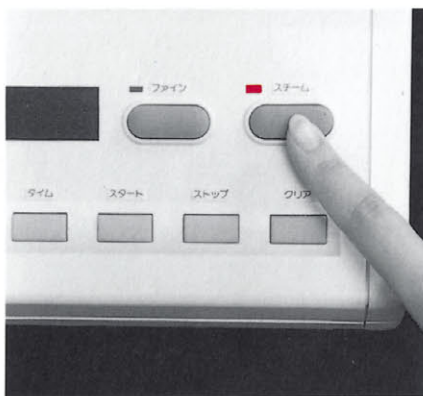

△注意 スチームスイッチが入っている状態（表示ランプが点灯）でタンクフタを開けたり、注水はしないでください。スチーム噴出口から湯滴が出てやけどをすることがあります。

●各表示が3回点滅表示した場合の処置方法は次のとおりです。

水量不足 —— タンクフタを開け、水またはお湯をタンク内部の水位ライン下まで入れて、再度タンクフタをしっかりと締めてから、もう一度スチームスイッチを押してください。


水量過多 —— タンクフタを開け、排水ツマミの矢印が「開」を指す位置まで回して水位ライン以下になるまで排水し、排水ツマミ・タンクフタをしっかりと締めてから、もう一度スチームスイッチを押してください。

ノズル確認 —— スチーマーを使用範囲まで上げてから、もう一度スチームスイッチを押してください。

7

蒸気が出てきたら、ファインスイッチを押してください。「ジー」という音がしてスチームがキメ細かな状態に変わります。

●タンクに水を入れた場合には、蒸気が出るまでに約6～7分かかります。

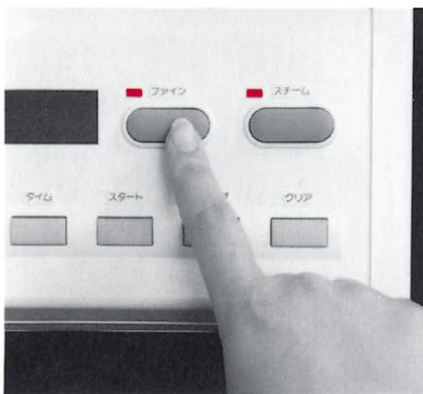

8

タイマーをP.10の「タイマーセット」にしたがって、P.28からの各肌質別「お手入れチャート」に記載されている使用時間1~3分にセットし、スチーム噴出口から30cm離れてご使用ください。

●タンク内のお湯が少なくなると、スチームスイッチが自動的に切れます。



⚠ 注意 スチーマーの使用中はスチーム噴出口に触れないでください。やけどをすることがあります。


⚠ 注意 使用中にスチーマーの角度を変えないでください。スチーム噴出口から湯滴が出てやけどをすることがあります。

●角度を変えたいときは、スチームスイッチを切ってください。(表示ランプの消灯を確認してください)

9

設定時間の経過を知らせるメロディーが流れたら、タイマーストップスイッチとスチームスイッチを押して切ってください。(表示ランプの消灯を確認してください)


スチーム噴出口から蒸気が出なくなるのを確認してから、スチーマーを収納してください。

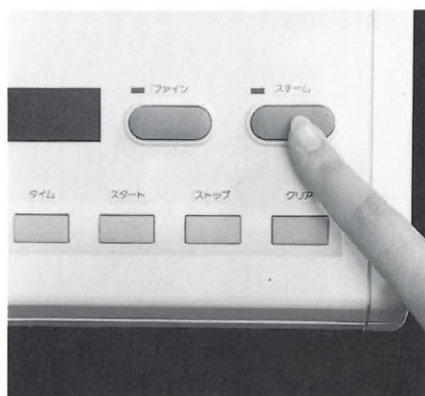

⚠ 注意 スチーム噴出口から蒸気が出ている状態で収納しますと、湯滴が出てやけどをすることがあります。

10


排水つまみを、矢印が「開」を指す位置まで回してタンク内のお湯を排水トレーに排水してください。排水後は排水つまみを、「カチッ」と音が出て矢印が「閉」を指す位置まで回し、完全に締めてください。

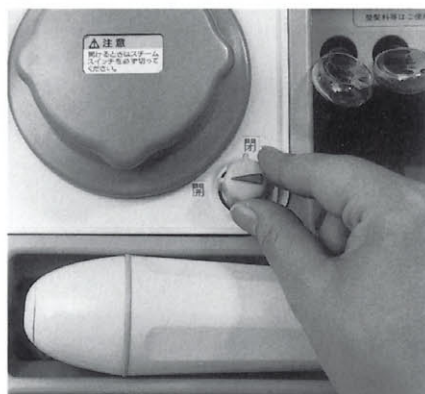

⚠ 注意 排水はコース終了後毎回おこなってください。毎回排水をしないでご使用をつづけると、タンク内の排水口などがつまり、スチーム噴出口から湯滴が出てやけどをしたり、故障の原因となります。

11

排水トレーを取り出してお湯を捨ててください。排水トレーの収納は完全に奥まで入れてください。

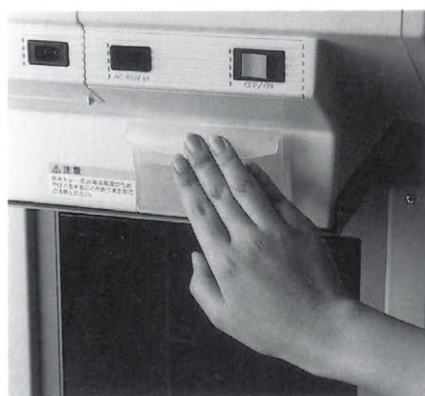

⚠ 注意 排水トレーのお湯を捨てる際は注意してください。高温のためやけどをすることがあります。


テスラーステップ テスラー(ガラス管マッサージ)のご使用方法

ガラス管ですべらすようにお肌をマッサージします。

ご使用のまえにP.26の「スキントイプチャート」でご自分の肌質をお選びのうえ、P.28からの各肌質別「お手入れチャート」に記載されている使用時間・使用回数・使用方法を正しくお守りください。

テスラーを取り出し、テスラープラグ差込口（内側）へテスラープラグを差し込んでください。

●通常は内側の差込口をご使用ください。プラグを差し込んだまま、テスラー収納トレーにテスラーを入れて本体のフタができます。

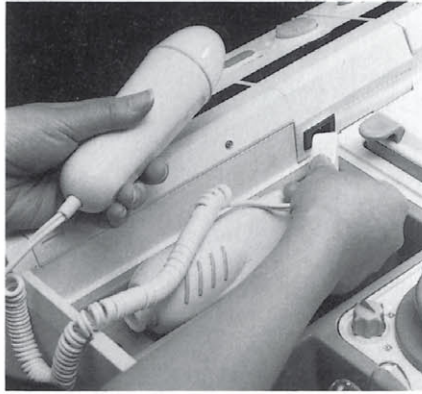



1

用途にあったガラス管を選び、ガラス管の中程を持って右に回しながらテスラーに取付けてください。

スプーン型
お顔のマッサージ用



クシ型
頭皮のマッサージ用

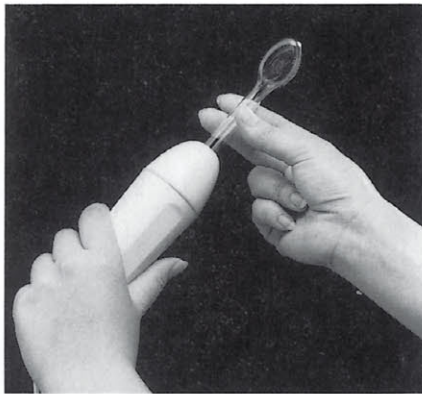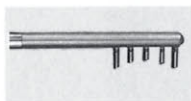


⚠ 注意 ガラス管は、落としたりぶつけたりしますと、破損し破片が飛び散り、けがをすることがあります。取扱いには十分ご注意ください。

⚠ 注意 ガラス管の頭部を持って回したり、固く締めつけたりしないでください。破損することがあります。

2

テスラースイッチを押して入れてください。（表示ランプの点灯を確認してください）出力メーターの針がグリーンゾーン中程を指すように出力調整つまみを回して、使用可能な状態にしてください。

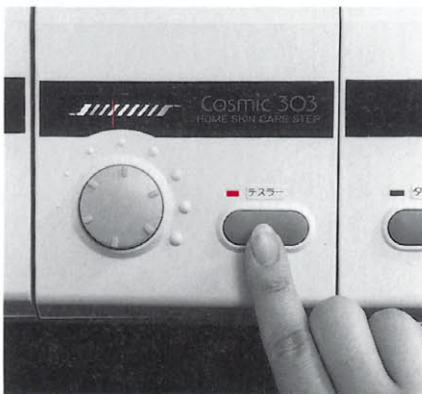

使用可能な状態


スプーン型ガラス管：ガラス管の中に紫光線が発生し、肌に触れると刺激を感じる。

クシ型ガラス管：刺激を感じるが、紫光線は発生しない。

3

出力調整つまみで、P.28からの各肌質別「お手入れチャート」に記載されている出力に、ガラス管をお肌にあてた状態で調整してください。

出力調整つまみは右に回すと出力が強くなり、左に回すと弱くなります。

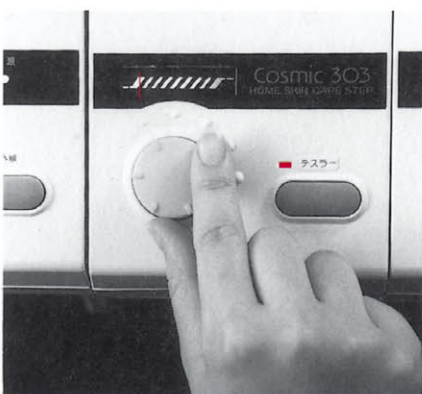

⚠ 注意 レッドゾーンでは使用しないでください。発振部の故障や皮膚トラブルの原因となります。

●スプーン型ガラス管をお肌に当てると出力メーターの針が若干さがります。

●クシ型はスプーン型に比べて刺激が強くなっています。テスラーの出力を最小限まで弱めてご使用ください。

4

5

P.10の「タイマーセット」にしたがって、P.26からの各肌質別「お手入れチャート」に記載されている使用時間1～3分にセットし、スチーム噴出口から30cm離れてファインスチームをあてながら、ガラス管を軽く滑らすようにしてテスラーマッサージをおこなってください。



⚠ 警告 揮発性の高い整髪料などを塗布してガラス管マッサージをおこなったり、放電させているガラス管をベンジンや除光液などの揮発性の高いものに絶対に近づけないでください。引火することがあります。整髪料はマッサージ後にご使用ください。


⚠ 注意 一カ所に集中したテスラーマッサージはおこなわないでください。また、目の回り・くちびるのお手入れはしないでください。

⚠ 注意 ガラス管を強く押しつけると破損してけがをすることがありますので、十分ご注意ください。

- 安全のためテスラースイッチは約5分経過すると自動的に切れます。
- ご使用后、テスラーからはずしたガラス管はガラス管収納トレーへ差し、テスラーはテスラー収納トレーへ収納してください。


6

設定時間の経過を知らせるメロディーが流れたら、タイマーストップスイッチ、スチームスイッチ、テスラースイッチを押して切ってください。(各表示ランプの消灯を確認してください)

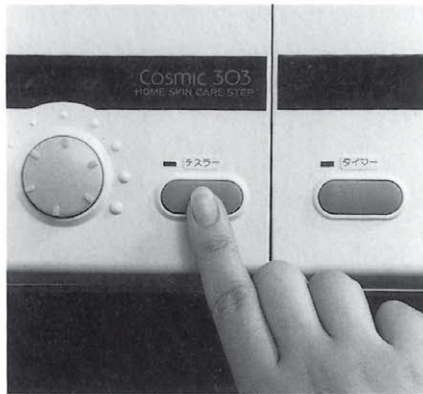

紫外線の誘導方法

スプーン型ガラス管から紫外線が発生しないときは出荷の際、紫外線の発生検査を十分におこなっていますが、真空管の特性により、ご使用の際に発生状態が悪いことがあります。その場合には、クシ型を放電させ、右図の方法で一度誘導してからご使用ください。

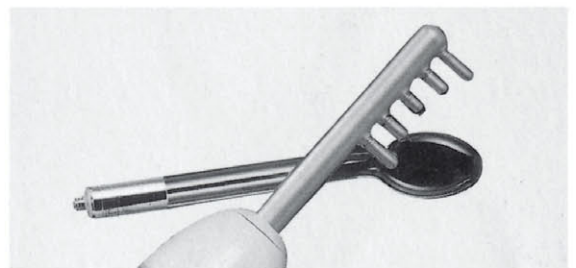

オゾン発生について

テスラーマッサージの際に、ガラス管と皮膚接触部分にオゾンが発生しますが、ご使用時の吸入空気中のオゾン濃度は0.02～0.04ppmと微量で、通常のご使用による弊害はありません。

備考：日・米等における労働環境基準の規定する、1日8時間1週40時間の正規の労働時間中反復暴露されても健康に悪影響を及ぼさないオゾン許容濃度は、0.1ppmとされています。

クリーナーステップ クリーナー(吸引式)のご使用方法


皮膚表面や毛穴の汚れを、吸引して取り除きます。

ご使用のまえにP.26の「スキントイプチャート」でご自分の肌質をお選びのうえ、P.28からの各肌質別「お手入れチャート」に記載されている使用時間・使用回数・使用方法を正しくお守りください。

⚠ 注意 クリーナープラグ差込口にはクリーナー以外のものは使用しないでください。ドライヤーなどを使用しますとヒューズが切れ、故障の原因となります。


1

クリーナーを取り出し、クリーナープラグ差込口へクリーナープラグを差し込んでください。

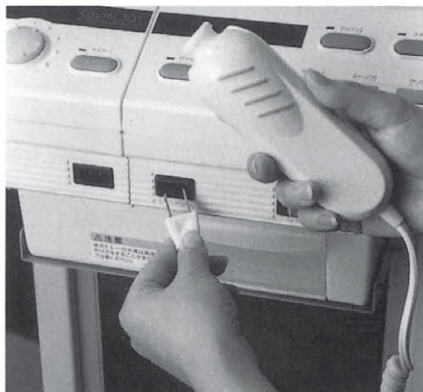


2

用途にあった吸引ゴムを選び、クリーナーに取付けてください。

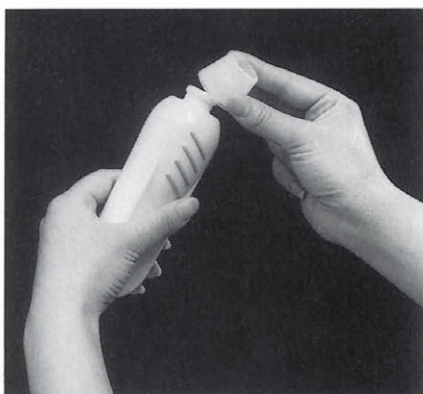


吸引ゴム
大：ひたい・ほほ・あご用
小：鼻の回り用

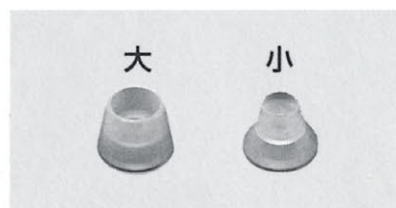


3

クリーナーについている吸引切換スイッチをお肌にあった吸引力にセットしてください。

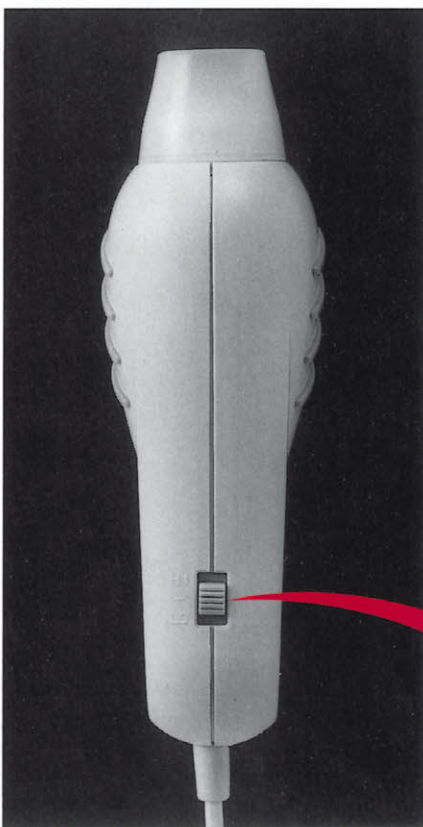


吸引切換スイッチ
HI：吸引力が強い。
-：スイッチが切れた状態。
LO：吸引力が弱い。

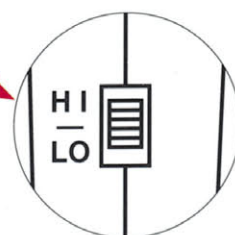

⚠ 注意 同じところを何
度もかけたり、
皮膚を無理に引っ張ったりしな
いでください。
また、目の回り・くちびるのお
手入れはしないでください。



4 お顔の中心から外側へ、クリー
ナーをご使用ください。

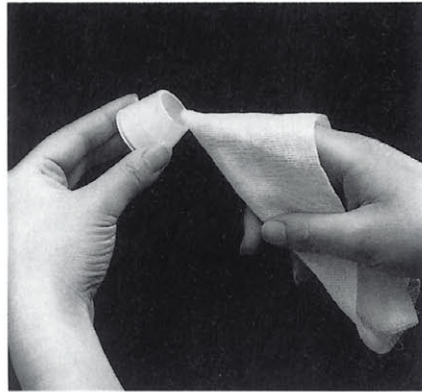

5 ご使用後は吸引ゴムを取りは
ずし、汚れをよく落としてか
ら収納してください。

赤外線ステップ 赤外線のご使用方法

お顔に赤外線をあてて、皮膚温度を高めます。


ご使用のまえにP.26の「スキンタイプチャート」でご自分の肌質をお選びのうえ、P.28からの各肌質別「お手入れチャート」に記載されている使用時間・使用回数・使用方法を正しくお守りください。

1


赤外線ツマミを持って赤外線を完全に起こしてください。



●使用範囲(約80度以上)より下ではスイッチが入りません。

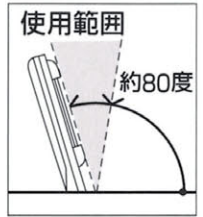

赤外線スイッチを押して入れてください。(表示ランプの点灯を確認してください)

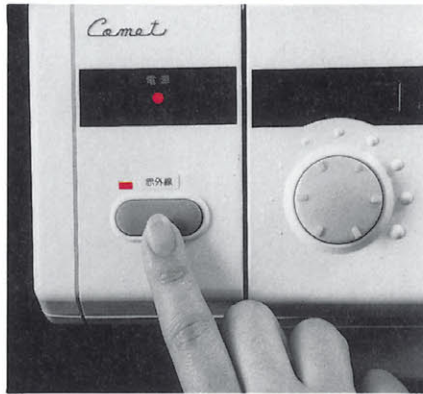

⚠ 注意 赤外線ランプにはさわらないでください。発熱部は高温でやけどをします。

⚠ 注意 赤外線を紙・ビニール・布などで覆わないでください。過熱して焼損することがあります。

●赤外線とスチーマーとの同時使用はできません。
スチーマー使用中、またはスチーマーが起きている状態では、「ノズル確認」の表示が3回点滅し、赤外線スイッチが入りません。この場合の処置方法は次のとおりです。

2

ノズル確認 —— スチーマースイッチを切りスチーマーを収納してから、もう一度赤外線スイッチを押してください。

3


P.10の「タイマーセット」にしたがって、使用時間1分にセットし、必ず専用アイガードを目にあてて、30cm離れてご使用ください。



⚠ 注意 付属の専用アイガードで必ず目を保護してください。

4

設定時間の経過を知らせるメロディーが流れたら、タイマーストップスイッチと赤外線スイッチを押して切ってください。(表示ランプの消灯を確認してください)

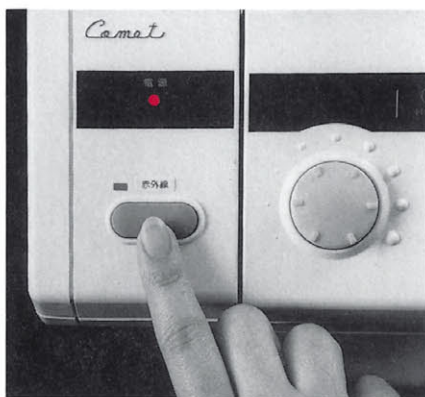

- 安全のため赤外線スイッチは約3分経過すると自動的に切れます。
- 赤外線は、ご使用の2～3分後、温度が下がってから収納してください。

赤外線ステップ 全ステップ終了後には…

全ステップ終了後には…

- 蛍光灯スイッチとコスミック本体の電源スイッチを切り、電源表示ランプの消灯を確認して、電源プラグを家庭用電源のコンセントから抜いてください。
- タンク内を排水し、排水トレイのお湯を捨ててください。
- コスミックスタンドをご利用の場合は、スタンドの電源プラグを家庭用電源のコンセントから抜いてください。


本器のお手入れ

各部のお手入れはつぎの方法で正しくおこなってください。

⚠ 注意 お手入れは、必ず電源プラグを家庭用電源のコンセントから抜いておこなってください。

コスミック本体

プラスチック部分の汚れは、ぬるま湯か石けん液を含ませた柔らかい布で拭きとってください。

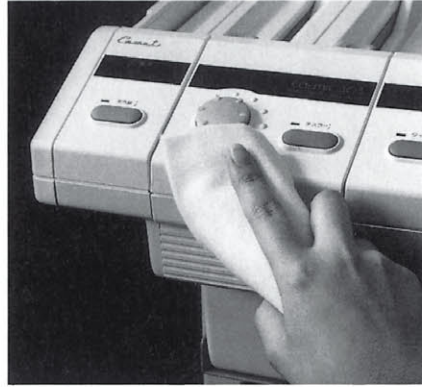

⚠ 注意 シンナーなどの揮発性の高いもの・みがき粉・たわし・熱湯などは使用しないでください。プラスチックが変質したり、傷がつきます。

タンク内

排水後、タンク内の水滴は布で拭きとってください。

タンク内の水垢は1年に1～2回の割合で、コメット美顔器専用の「タンク洗浄剤」で掃除してください。



⚠ 警告 タンク内の掃除には、紙質のものを絶対に使用しないでください。タンク内の排水口などがつまり、スチーム噴出口から湯滴が出てやけどをしたり、故障の原因となります。

⚠ 注意 タンク内の洗浄には、家庭用洗剤など、専用の「タンク洗浄剤」以外のものを使用しないでください。


⚠ 注意 「タンク洗浄剤」をご使用の際は、洗浄剤の使用説明書に記載されている使用方法・注意事項をよくお読みのうえ正しくご使用ください。

クリーナー吸引ゴムとスポンジ

クリーナー吸引ゴムは毎回クリーナーから取りはずし、汚れを柔らかな布やティッシュペーパーで拭きとるか中性洗剤を使って洗ってください。



クリーナー吸引口内部にあるスポンジは、1か月に1回の割合で、ピンセットなどで取り出して洗浄し、乾いた布などでよく水気をとってから元にもどしてください。

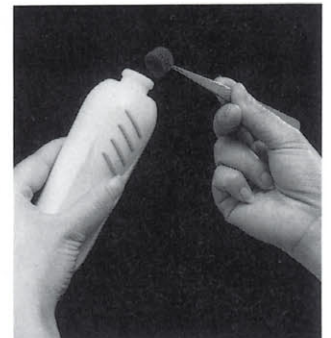

部品交換

部品の交換はつぎの方法で正しくおこなってください。



警告


交換方法が記載されている部分以外の交換や、本器を改造してのご使用は、絶対におこなわないでください。




注意

部品交換は、必ず電源プラグを家庭用電源のコンセントから抜いておこなってください。


コスミック本体のヒューズ交換

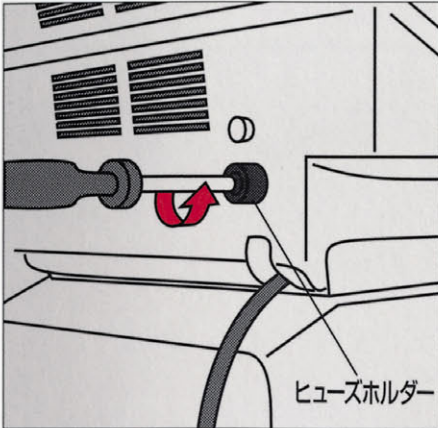

1 コスミック本体のうしろ側のヒューズホルダーを⊕ドライバーで左へ回して開けてください。

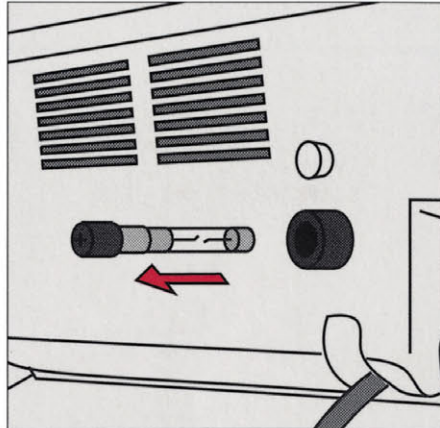

2 古いヒューズを取り出してください。

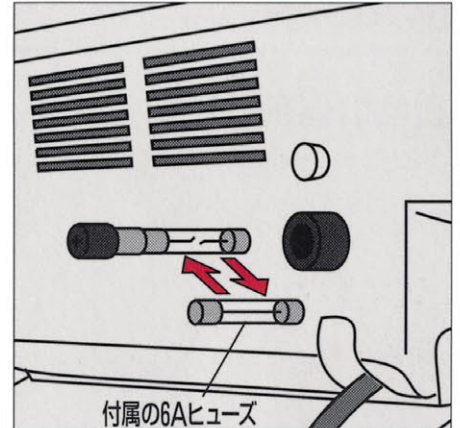

3 付属のコスミック本体用6Aヒューズと交換してください。




注意


■付属のヒューズ以外は使用しないでください。

■付属の6Aヒューズはコスミック本体用です。10Aのコスミックスタンドのヒューズ交換には使用できません。スタンドのヒューズ交換については、販売店またはコメントフリーダイヤルへご相談ください。


テスラーコイルの交換

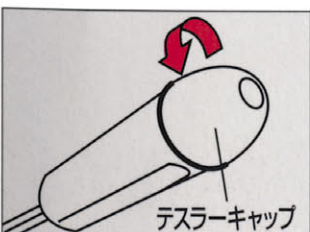


1 テスラーキャップを左へ回してはずしてください。

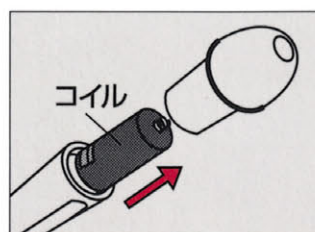

2 中に入っているコイルを取り出してください。

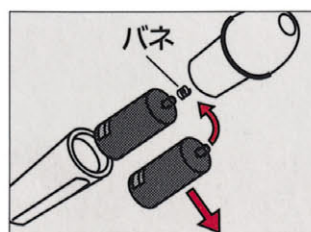

3 古いコイルについているバネをはずし新しいコイルの先にはめ込み、これを上に向けて差し込んでください。

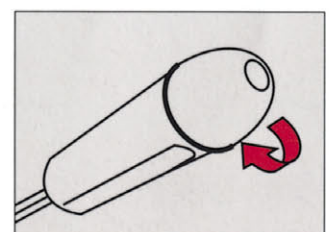

4 テスラーキャップを右に回してしっかりと締めてください。

交換部品の寿命目安

各消耗品の平均寿命はつぎのとおりです。

ガラス管 1年


これらの平均寿命は、毎日約5分間使用した場合を目安にしています。5分以上連続使用すると消耗度が激しくなります。再度ご使用の場合は、5～10分ぐらいの間隔をとると格段と寿命が長くなります。

テスラーコイル 3年

保管


日常の保管

ご使用後は必ず本体フタを閉じて保管してください。

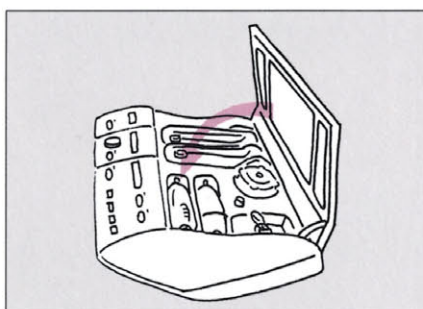


⚠ 注意 本体のフタを開けておくと、本体のフタにさわったり本体がかたむいたりした際に、急にフタが閉まり、けがをしたり蛍光灯の故障の原因となります。

お子様の手にふれないように各部品は所定の場所に正しく収納し、本体フタを閉じて、付属の本体カバーをかけてください。

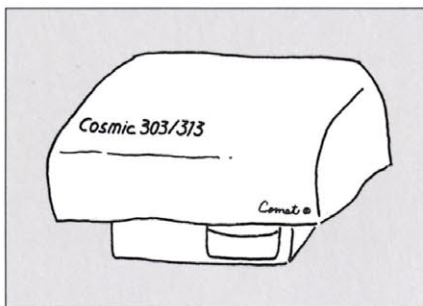

⚠ 注意 お子様ガラス管を破損させ、けがをすることがありますので、十分注意してください。

湿気の多い場所や直射日光の当たる場所はさけてください。

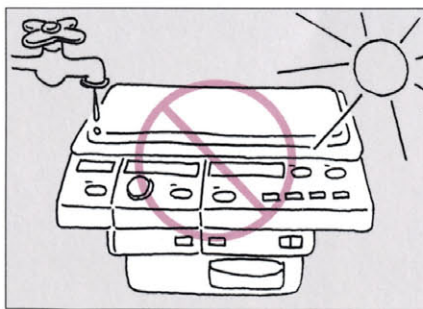

長期の保管

1ヵ月以上の長期間ご使用されないときは、タンク内の水分をかわいた布で十分ふきとり、「日常の保管」の注意事項を守って保管してください。

本器使用中または保管において落下したり水につかった場合は、ご使用にならず、販売店またはコメントフリーダイヤルへご相談のうえ、必ず点検にお出してください。

アフターサービス

- 本器には保証書を添付しております。保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- 保証期間はご購入日より1年間です。保証期間中は保証書の記載内容によりコメット電機株式会社が修理いたします。
- 保証期間経過後、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。その他詳細につきましては保証書をご参照ください。
保証期間経過後または保証書を提示されない場合の修理などについてご不明な点は、販売店またはコメットフリーダイヤルへご相談ください。
- ご愛用のお客様へのアフターサービス充実のため、お客様のデータをコンピューター登録いたします。本器がお手もとに届きましたら、添付のアンケート用紙をご記入のうえご投函ください。
また、ご結婚・ご転居などにより登録内容に変更があった場合は、届出用紙に必要事項をご記入のうえご投函ください。

点検

本器を長年ご使用されて、プラグやコードに傷や変形があったり、タンクの排水ができないなど、異常が認められた場合は、故障や事故防止のためご使用を中止し、必ず販売店またはコメットフリーダイヤルへ点検についてご相談ください。

廃棄

- ガラス管や蛍光灯を廃棄する際は、厚紙などでしっかりと包装し、外側に「キケン」と明記してからお捨ててください。
- コスミック本体を廃棄する場合は、販売店またはコメットフリーダイヤルへご相談ください。

仕様

コスミック303/313

型式	Cosmic 303	Cosmic 313	クリーナー
定格電圧	AC24V	AC100V	AC100V
定格周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
消費電力	22W (最大時)	ヒーター 380W ファイン 10W 赤外線 130W 蛍光灯5W×2	10W
外形寸法	幅43cm×奥行38cm×高さ25cm		
全体重量	9.8kg		
付属品	専用アイガード/本体カバー/ケーブル		
備考	スチーマー ▼ 81-18089 テスラー ▼ 61-14526 クリーナー ▼ 91-51095		

コスミックスタンド(トレーアーム付)

寸法	幅66cm×奥行53cm×高さ62cm (MIN.)~74cm (MAX.)
重量	9.9kg
備考	㊦

価格 (税込み価格)

コスミック303/313	¥283,700
コスミックスタンド	¥45,000
消耗部品	
スプーン型ガラス管	¥2,200
クシ型ガラス管	¥3,900
テスラーコイル	¥3,600

●仕様および外観は予告なく変更することがありますのでご了承ください。