

# 取扱説明書

コメット美顔器

Cosmic·duo  
501/503



コスミックスタンド (別売)

このたびはコメット美顔器をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

ご使用前に、この取扱説明書と別添の保証書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。お読みになられた後もご使用になる方がいつでもご覧になれる所に大切に保管してください。

# 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、コメット美顔器を正しくご使用ください。

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



この表示の注意事項を守らないと、死亡や重傷などの人身事故の原因となる可能性が高くなります。



この表示の注意事項を守らないと、死亡や重傷などの人身事故の原因となる可能性があります。



この表示の注意事項を守らないと、傷害などの人身事故の原因となったり、家財などに損害を与える原因となる可能性があります。

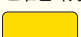



⊘の表示は、**してはいけない**ことを示しています。具体的な内容は、⊘の中に絵で表示したり、近くに説明で示してあります。左図の例では、「分解してはいけない」ことを意味しています。



●の表示は、**しなければならない**ことを示しています。具体的な内容は、●の中に絵で表示したり、近くに説明で示してあります。左図の例では、「差込みプラグをコンセントから抜かなければならない」ことを意味しています。

## 警告ラベル表示位置

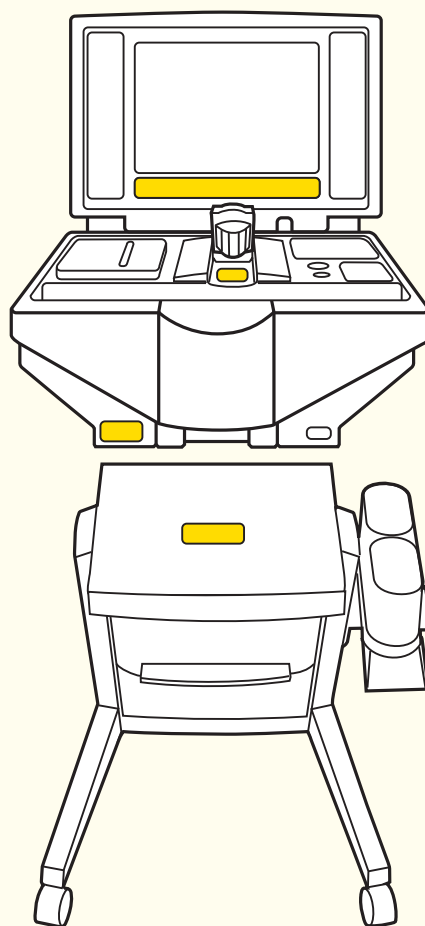コスミック・デュオ本器とコスミックスタンド(別売)には、危険に対する情報を記載した警告ラベルが、イラストの  位置に貼付してあります。



	PAGE	
ご使用の前に	2~3	●安全のために必ずお守りください
安全にご使用いただくために 取扱い上の注意	4~5	●コスミック・デュオ本器●改造の禁止 ●電源●電源コード●電源プラグ ●タンクの注水と排水●スチーマー・タンクフタ ●ガラス管●赤外線
各部の名前と機能	6~8	●コスミック・デュオ501/503 ●操作パネル詳細●コスミックスタンド(別売)
コスミックスタンド(別売) の組立・取付け	9	●組立方法 ●コスミック・デュオ本器との取付け方法
ご使用前の準備	10	●本器のセット ●タイマーセット
使用方法	12~14	スチームステップ
	15~17	テスラーステップ
	18~19	クリーナーステップ
	20~21	赤外線ステップ
	21	全ステップ終了後には…
本器のお手入れ 部品交換・その他	22~24	●本器のお手入れ●部品交換●保管 ●アフターサービス●点検●廃棄
設定変更	25~27	●設定項目●設定に使用するスイッチ ●メロディ音量を設定する●ブザー音量 を設定する●表示の明るさを設定する ●購入したときの状態に戻す
こんなときには…Q&A	28~29	
スキンタイプチャート	31	《肌質判定チャート》
パッチテスト	32	●パッチテストの方法 ●お手入れチャートに進む前に ●洗顔●テスラーマッサージ ●クリーナー●スキントリートメント ●ファインスチーマー●赤外線
各ステップのお手入れ方法	33~35	
お手入れチャート	36~37	敏感肌の方用フルコース/シンプルコース
	38~39	混合肌の方用フルコース/シンプルコース
	40~41	乾性肌の方用フルコース/シンプルコース
	42~43	脂性肌の方用フルコース/シンプルコース
	44~45	普通肌の方用フルコース/シンプルコース
	46~47	妊娠中の方用フルコース/シンプルコース
仕様・部品価格	48	

# ご使用前に

## 安全のために必ずお守りください

### ⚠ 危険

- 次のような医療用電子機器との併用は、電子機器に誤作動を招くおそれがありますので絶対にしないでください。
  - ペースメーカーなどの体内植(埋)込型医療用電子機器。
  - 心電計などの装着型医療用電子機器。

### ⚠ 警告

- 何らかの病気で通院加療中の方、下記の治療を受けている方、体内に金属などを使用している方は、必ず医師とこの美顔器によるお手入れについてご相談の上ご使用ください。
  - 悪性腫瘍のある方、心臓に障害のある方、血圧に異常のある方、知覚障害のある方。
- 皮膚科通院中、または皮膚科の薬を使用されている方は、この美顔器を使用しないでください。
- 本器は顔のお手入れをする美顔器です。治療目的としての使用は絶対にしないでください。

### ⚠ 注意

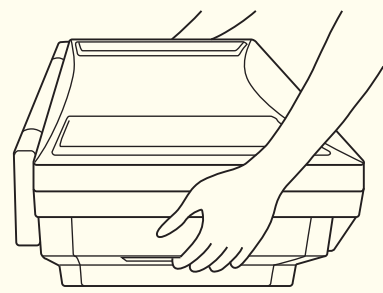
- お子様には使用しないでください。
- 肌質によりお手入れ方法が異なります。使用する前にP31の「スキンタイプチャート」によりご自分の肌質をお選びの上、P33からの「各ステップのお手入れ方法」と各肌質別「お手入れチャート」に記載されている使用時間・使用回数・使用方法をよく守り、使いすぎないようにご注意ください。
  - 体調が悪い時、身体に異常を感じる時は、美顔器によるお手入れをお休みください。
  - 肌質を選べなかったり、肌質がわからない場合は、無理に使用せず販売店またはスキンケア フリーダイヤルへお問い合わせください。
- 妊娠中の方はお手入れチャートP46の「妊娠中の方用」コースでご使用ください。
- 皮膚に炎症(日焼け・赤み・ブツブツ・かゆみなど)があるときはこの美顔器を使用しないでください。
- 皮膚の弱い方、アレルギー体質の方は無理をせず、販売店またはスキンケア フリーダイヤルへご相談の上ご使用ください。
- 本器ご使用中、皮膚に異常を感じたときは、ただちに使用を中止し、販売店またはスキンケア フリーダイヤルへご相談ください。

スキンケア フリーダイヤル ☎0120-240-114

⚠ 注意


## 本器の持ち方について

- 本器を持つときは、本体フタを閉め、本体取っ手(両側面)をお持ちください。
- 他の箇所を持ちますと、不安定で落とす場合があります、足などをけがしたり故障の原因となります。(本器重量は約12kg)




## 設置について

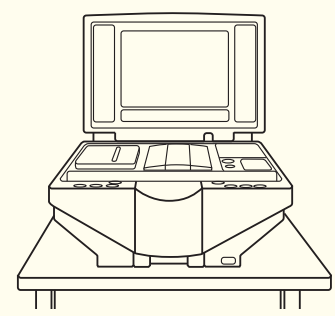
- 水平な場所でご使用ください。
- ぐらついた台の上や傾いた所は、落ちたり倒れたりして危険です。



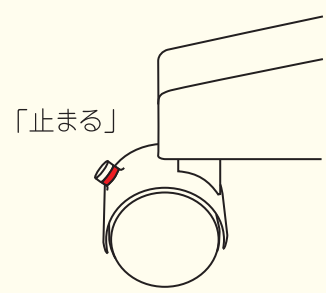
- コスミックスタンド(別売)はキャスターがしっかりと安定する床に設置し、キャスターのストッパーを赤い帯が出ている「止まる」の状態にしてご使用ください。
- 床が不安定だったり、ストッパーが「動く」の状態になっていると、倒れたりして危険です。



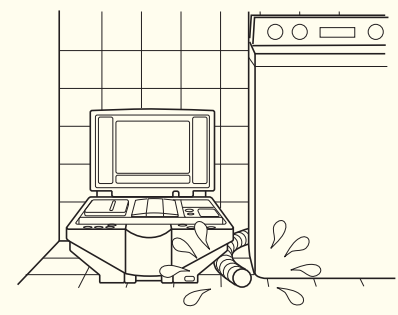- 湿気・ほこりのある所や、極端に温度の高い所では使用しないでください。
- お風呂場や洗濯機のそばなど水のかかる場所、湿気・湯気・ほこりの多い場所やストーブのそばなどに置きますと、故障したり火災の原因となります。



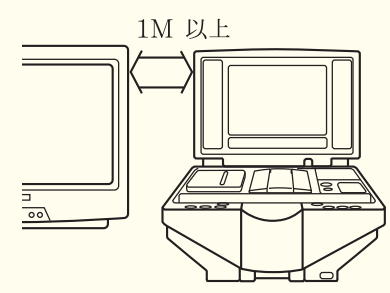- テレビ・ラジオその他周辺の機器から1メートル以上離れてご使用ください。
- 放電しているガラス管を、周辺の機器に接触させたり間近で使用しますと、機器が誤作動するおそれがあります。なお、1メートル以上離れても周辺の機器に雑音が入る場合がありますが、影響はありません。



# 安全にご使用いただくために 取扱い上の注意

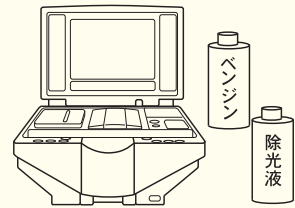
## ⚠ 警告

### コスミック・デュオ本器

- 引火性のものの近くで使用したり、本器の収納トレーなどにベンジンや除光液など揮発性の高いものは置かないでください。
- 引火し、やけどや火災の原因となります。



禁止




### 改造の禁止

- 本器を改造してのご使用は絶対に行わないでください。  
P23の「部品交換」で指定した以外の内部には絶対に触れないでください。



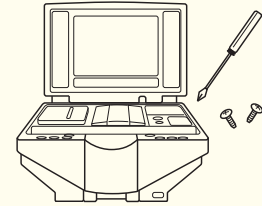分解禁止




## ⚠ 注意

### 電源

- 家庭用電源(AC・100V)でご使用ください。  
コスミック・デュオ501本体は専用アダプター(AC・24V)をご使用ください。
- ほかの電源での使用は、故障・火災などの原因となります。



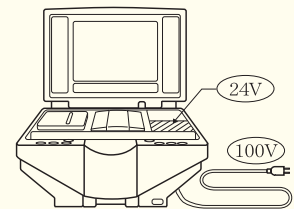強制




### 電源コード・電源プラグ


- 電源コードを無理に折り曲げたり、重い物をのせたり、はさみ込んだりしないでください。
- コードが破損し、発火・感電の原因となります。
- 電源コードを抜くときは、電源コードを引っばらず必ずプラグを持って抜いてください。
- 火災・感電の原因となるおそれがあります。
- \*電源コードの破損、プラグの接触不良にお気づきの際は、直ちに使用を中止し、販売店またはマシン フリーダイヤルへご連絡ください。



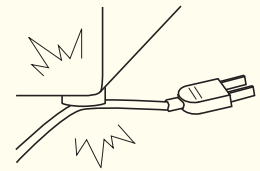禁止



電源プラグを抜く

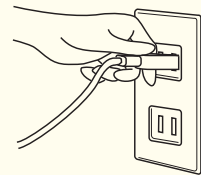


### タンクの注水と排水

- 水位ラインを超えてタンクに注水しないでください。
- スチームスイッチが入らなかったり、スチーム噴出口から湯滴が出てやけどをするおそれがあります。
- タンクには水またはお湯以外のものは入れないでください。
- やけどや故障の原因となります。
- タンク内の排水は、使用後毎回行ってください。
- 毎回排水をしないで使用を続けると、タンク内の排水口などがつまり、スチーム噴出口から湯滴が出てやけどをしたり、故障の原因となります。



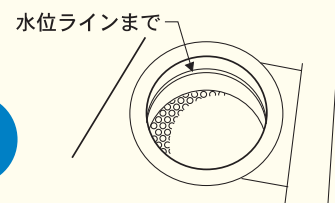強制



## ⚠️ 注意

### タンクの注水と排水

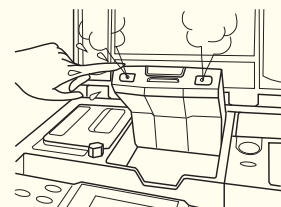
- 排水トレイのお湯を捨てる際は注意してください。
- 高温のためやけどをするおそれがあります。

### スチーマー・タンクフタ


- スチーマーの使用中には、スチーマー取っ手、スチーム噴出口に触れないでください。
- 高温でやけどをするおそれがあります。
- スチーマーの使用中には、スチーマーの角度を変えないでください。
- スチーム噴出口から湯滴が出てやけどをするおそれがあります。
- スチーマーの使用中や使用直後は、タンクフタを開けないでください。
- 熱湯でやけどをするおそれがあります。
- \*スチーム噴出口が詰まるなど、タンク内が過圧すると安全機能が作動し、タンクフタ側面から蒸気が出ます。  
その場合には、やけどをするおそれがありますのでタンクフタには触れず、すぐに電源スイッチを切り、販売店またはマシンフリーダイヤルへご連絡ください。



接触禁止



禁止

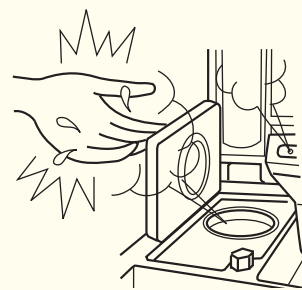

### ガラス管

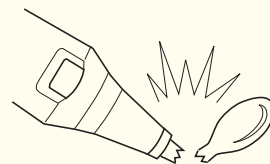
- 揮発性の高い整髪料などを塗布してガラス管マッサージを行ったり、放電させているガラス管にベンジンや除光液などを絶対に近づけないでください。
- 放電しているガラス管が、揮発性の高いものに触れると引火し、やけどの原因となります。
- ガラス管を落としたり、ぶつけたりしないでください。
- 破損し破片が飛び散り、けがをするおそれがあります。  
落としたりぶつけたりした際、使用可能な状態でも、ガラス管の表面にひびが入っている場合があります。表面をよく確認し、ひびなどがありましたらご使用を中止してください。
- ガラス管は軽く滑らすようにマッサージしてください。
- 強く押しつけると破損してけがをするおそれがあります。



禁止



禁止




### 赤外線

- 赤外線の使用直後は、赤外線カバーには触れないでください。
- 高温でやけどをするおそれがあります。
- 赤外線を紙・ビニール・布などで覆わないでください。
- 過熱して焼損し、火災のおそれがあります。



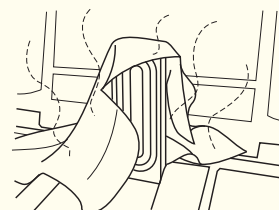禁止



# 各部の名前と機能

## コスミック・デュオ501/503

各部の名前と機能

本体フタ

本体フタ取っ手(両側面)

カガミ

照明(両側面)

操作パネル

本体取っ手(両側面)

排水トレー

電源スイッチ

スチーマー

スチーム噴出口

スチーマー取っ手

赤外線

赤外線取っ手

赤外線カバー

タンクフタ取っ手

タンクフタ

排水つまみ

クリーナープラグ差込口

クリーナー収納トレー

ガラス管収納トレー

コスミック・デュオ501本体

コスミック・デュオ503本体

テスラープラグ差込口

テスラー収納トレー

アダプタープラグ差込口

電源コード

アダプタープラグ

ヒューズホルダー

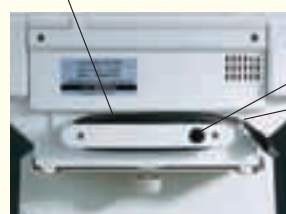
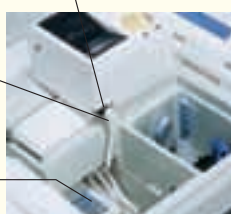
コードフック

電源プラグ

アダプター

501を抜いた内側


503うしろ側





## テスラー(ガラス管マッサージ)

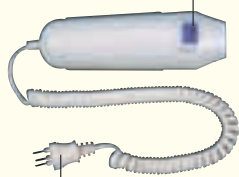ガラス管取外しボタン



テスラープラグ

スプーン型ガラス管




ソケット



クシ型ガラス管

## クリーナー

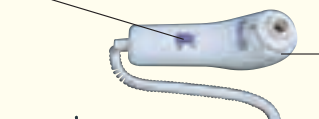電源スイッチ 吸引調整つまみ



クリーナープラグ


## 吸引ゴム



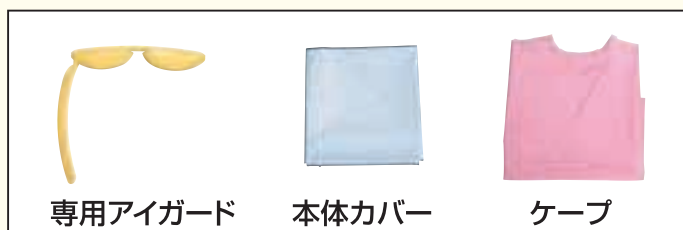大



小




専用アイガード

本体カバー

ケープ

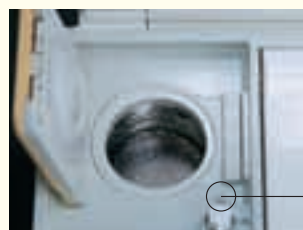
付属品



マイクロスイッチ


## 操作パネル詳細
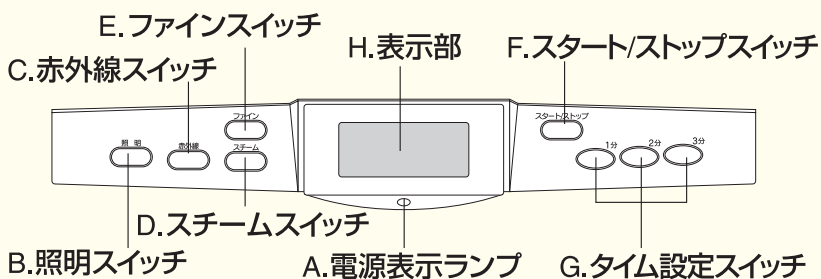
## ●操作パネル



- A. 電源表示ランプ  
スイッチを「入」にすると電源表示ランプが点灯します。
- B. 照明スイッチ  
スイッチを押すと照明が点灯し、もう1度押すと消灯します。
- C. 赤外線スイッチ  
スイッチを押すと赤外線が作動し、もう1度押すと終了します。
- D. スチームスイッチ  
スイッチを押すとスチーマーが作動し、もう1度押すと終了します。


## ●表示部詳細

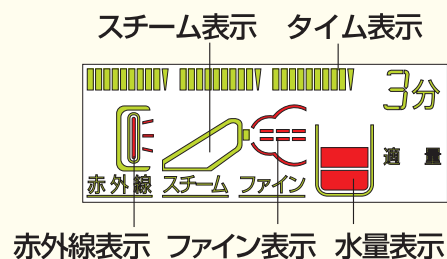

- E. ファインスイッチ  
スイッチを押すとファインが作動し、もう1度押すと終了します。
- F. スタート/ストップスイッチ  
スイッチを押すとタイマーが作動し、もう1度押すと終了します。
- G. タイム設定スイッチ  
各スイッチを押すと使用時間が設定されます。
- H. 表示部  
各機能の操作状態が表示されます。  
■ 各スイッチを押すとブザーが1回鳴り、操作違いのときは3回鳴ります。

## コスミック・デュオ501本体詳細
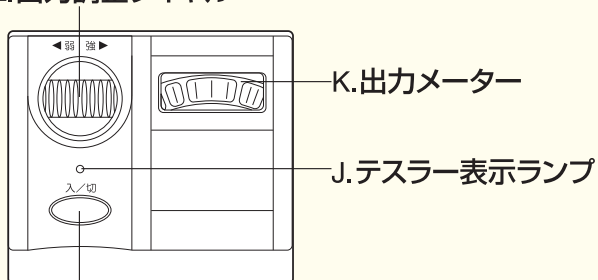
## L.出力調整ダイヤル




## I.テスラースイッチ

- I. テスラースイッチ  
スイッチを押すと、テスラーが作動し、もう1度押すと終了します。
- J. テスラー表示ランプ  
テスラースイッチを押すと表示ランプが点灯します。
- K. 出力メーター  
テスラーの出力度を表示します。
- L. 出力調整ダイヤル  
テスラーの出力度を調節します。

# 各部の名前と機能
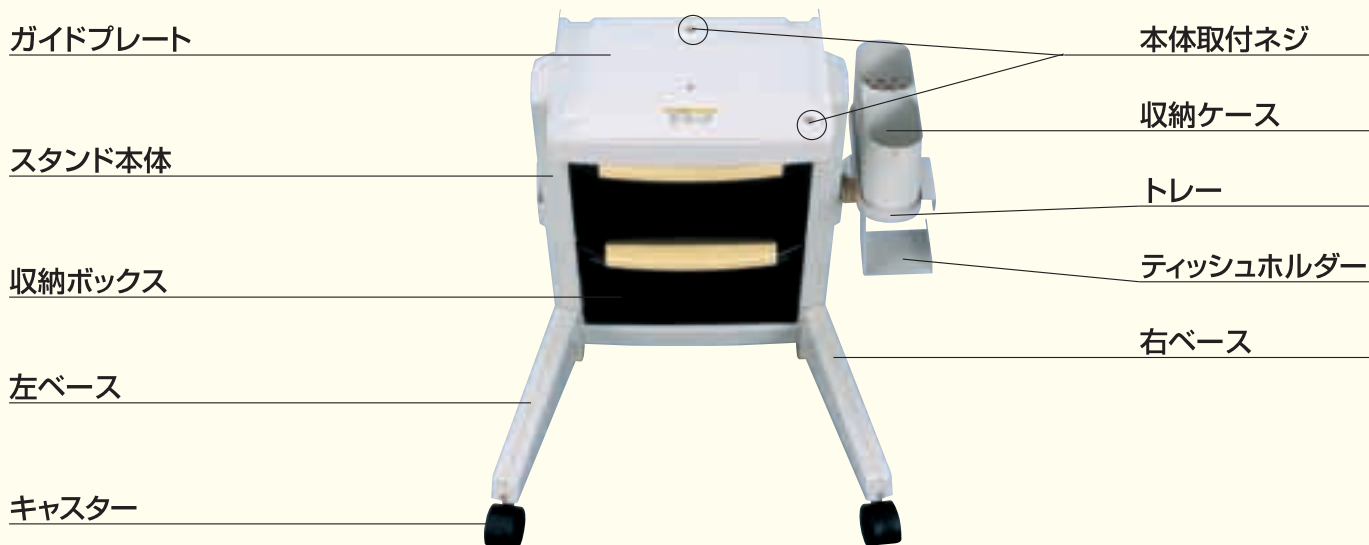
## コスミックスタンド(別売)



各部の名前と機能

### うしろ側

コスミック・デュオ本器をスタンドに取り付けてご使用の際は、スタンドうしろ側のAC100V・10Aコンセントに、本器の電源プラグを差し込んでください。

- コードフック  
\*本器の電源コードを止めてください。
- AC100V-10Aコンセント
- ヒューズホルダー(10A)
- スタンド電源コード
- スタンド電源プラグ  
\*家庭用電源をご使用ください。



### 部品・付属品



### 収納ボックス

収納ボックスは上下2段あり、取っ手を手前に引くと開きます。  
\*収納ボックスには、収納ケースが入ります。



### ストッパー

赤い帯が出ている状態でキャスターが止まります。

ストッパー



赤い帯がかくれるまで押すと、キャスターが動きます。



# コスミックスタンド(別売)の組立・取付け

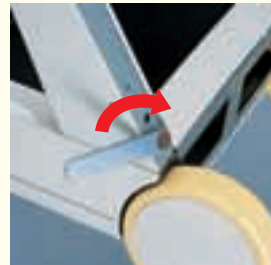
**⚠注意** コスミックスタンドの組立やコスミック・デュオ本器との取り付けは、必ず手袋を着用し手を保護してください。

## 組立方法

**1** 収納ボックスの扉を上に向けて、スタンド本体を横にしてください。



**3** ベースの穴に付属のボルトを差し込みスパナでスタンド本体にしっかりねじ込んで取り付けます。同様にもう片方のベースも取り付けてください。



**2** 片方のベースをキャスターが手前にくるように持ち、スタンド本体の穴に、ベースのツメをひっかけて、はめ込んでください。



**4** スタンド本体を立てスタンド本体上部の2つの穴に、ガイドプレートのツメをひっかけて手前にスライドさせ、付属のボルトで、しっかり取り付けてください。



\*詳しくはスタンド本体に添付してある説明書をお読みください。

## コスミック・デュオ本器との取付け方法

コスミック本器底部の足を、ガイドプレートの4カ所のクボミにセットし、クボミと本器の足が一致していることを確認してからネジを2カ所閉めてください。



**⚠注意** 本器の足がガイドプレートの4カ所のクボミに確実に一致されてないと、本器が傾いたり倒れたりして危険です。

## ブックホルダー

ブックホルダーはコスミックデュオの取扱説明書の収納にご使用ください。



## トレー

本体の両側面に付いているトレー差込口の左右どちらかにトレー金具を差込み付属のネジでしっかり取り付けてください。



トレー差込口

トレーは収納ケースをのせて使用できます。



## ティッシュホルダー

ティッシュホルダーはトレーの裏にある突起にティッシュホルダーの穴を合わせて、横にスライドさせ、ティッシュホルダーを固定してください。



# ご使用前の準備

## 本器のセット

**1** 本器を水平に置き、電源プラグを家庭用電源（AC・100V）のコンセントに差し込んでください。

\* スタンドをご利用の場合は、P8のコスミックスタンド「うしろ側」をご参照ください。

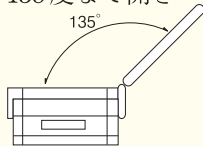


**3** 電源スイッチを「入」にして電源表示ランプが点灯するのを確認してください。



**2** 本体フタ取っ手に指を当て、使用しやすい位置まで開けてください。

\* フタは最大 135度まで開きます。



**4** 照明スイッチを押して、照明ランプが点灯するのを確認してください。

\* 照明はフタを閉めると自動的に消灯します。




## タイマーセット

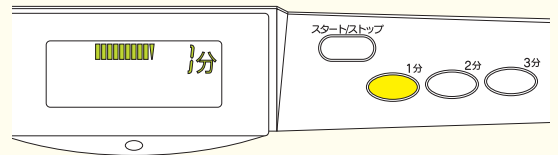各ステップでは、使用時間厳守のためタイマーをご使用ください。ステップに入る前に、あらかじめタイマーの操作方法をよく理解してください。


**1** タイム設定スイッチを押して使用時間をセットしてください。

\* 使用時間を設定すると、表示部に設定された分数と目盛が表示されます。




**2** スタート/ストップスイッチを押してください。目盛が点滅し、タイマーが作動し始めます。

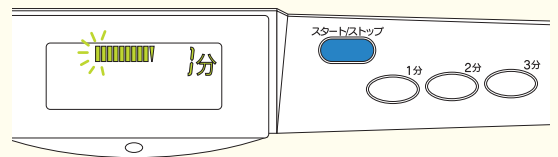\* 目盛の点滅は6秒ごとに消えます。




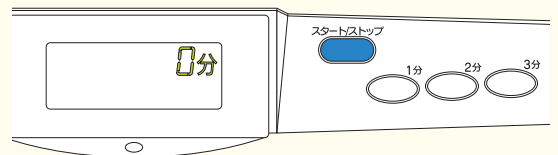**3** タイマーが作動し始めてから設定時間を変更したい場合は、一度スタート/ストップスイッチを押してタイマーを切ってから、もう一度設定し直してください。



**4** 設定時間が経過しますとメロディーが流れます。スタート/ストップスイッチを押してください。メロディーが止まります。

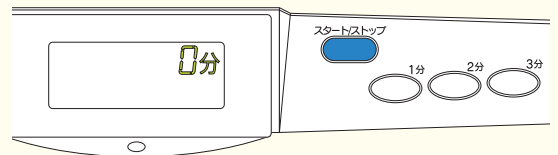\* メロディーの流れる時間は30秒間です。



## 使用方法

スチームステップ

テスラーステップ

クリーナーステップ

赤外線ステップ

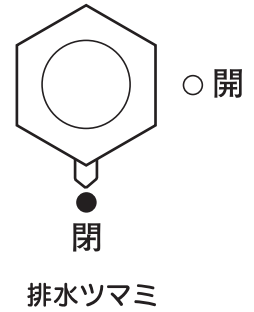
全ステップ終了後には…

# スチームステップ スチーマー(ファインスチーム)のご使用方法


お顔全体に微粒子の<sup>スチーム</sup>蒸気を当てます。

ご使用前にP31の「スキントイプチャート」でご自分の肌質をお選びの上、P33からの「各ステップのお手入れ方法」と各肌質別「お手入れチャート」に記載されている使用時間・使用回数・使用方法を正しくお守りください。

- 1** 排水つまみが「閉」を指し、排水コックが閉まっていることを確認してからタンクフタ取っ手を持ち上げ、タンクフタを開けてください。



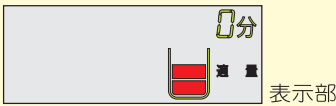- 2** タンク内部の水位ラインを超えないように、水またはお湯を入れてください。





**⚠ 注意** タンクに水またはお湯以外のものは入れないでください。やけどや故障の原因となります。

- 3** タンクフタを「カチッ」と音がするまで押して閉めてください。



**⚠ 注意** 蒸気漏れの危険がありますので、タンクフタはしっかりと閉めてください。

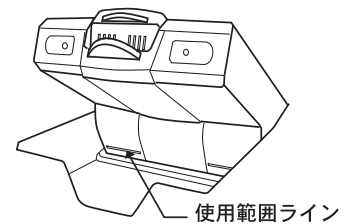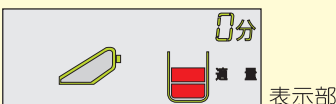
- 4** スチーマー取っ手を持ち、スチーマーを起こしてください。使用しやすい位置にセットしてご使用ください。



\* スチーマー下部に付いている使用範囲ラインが見える範囲が使用範囲となります。使用範囲外ではスチームスイッチが入りません。

5

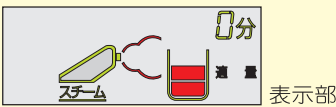スチームスイッチを押してください。



**注意**

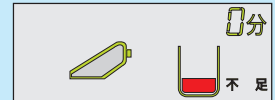
スチーマーの使用  
中や使用直後は  
タンクフタを開けないで  
ください。熱湯でやけどを  
するおそれがあります。

\* タンクに水を入れた場合には蒸気が出るまでに約4分かかります。

●ブザーが3回鳴り、表示部に「水量不足」「水量過多」「ノズル確認」「フタ確認」の表示がされた場合の処置方法は次の通りです。


**水量不足**——タンクフタを開け、水またはお湯をタンク内部の水位ライン下まで入れて、再度タンクフタをしっかりと閉めてから、もう一度スチームスイッチを押してください。

\* 水量不足の場合、表示部に右図が表示されます。




**水量過多**——タンクフタを開け、排水ツマミの矢印を「開」にして水位ライン下になるまで排水し、排水ツマミを「閉」に戻し、タンクフタをしっかりと閉めてから、もう一度スチームスイッチを押してください。

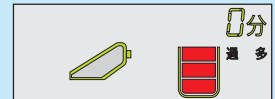\* 水量過多の場合、表示部に右図が表示されます。



**ノズル確認**——スチーマーを使用範囲まで上げてから、もう一度スチームスイッチを押してください。

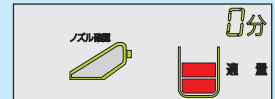\* 使用範囲までスチーマーが上がっていない場合、表示部に右図が表示され点滅して消えます。




**フタ確認**——タンクフタをしっかりと閉めてから、もう一度スチームスイッチを押してください。

\* タンクフタがしっかりと閉まっていない場合、表示部に右図が表示され点滅して消えます。



6

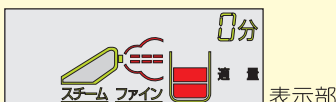蒸気が出てきたら、ファインスイッチを押してください。スチームがキメ細かな状態(ファインスチーム)に変わります。



ファインスチーム

7

タイマーをP10の「タイマーセット」に従って、P33からの「各ステップのお手入れ方法」と各肌質別「お手入れチャート」に記載されている使用時間1~3分にセットし、スチーム噴出口から30cm離れてご使用ください。



**⚠️ 注意**

スチーマーの使用中は、スチーマー取っ手、スチーム噴出口に触れないでください。やけどをするおそれがあります。角度を変えたいときは、一度スチームスイッチを切ってから動かしてください。

\* タンク内のお湯が少なくなると、スチームスイッチが自動的に切れます。

8

設定時間の経過を知らせるメロディーが流れたら、スタート/ストップスイッチを押し、タイマーを切ってから、スチームスイッチを切ってください。スチーム噴出口から蒸気が出なくなるのを確認してから、スチーマーを収納してください。

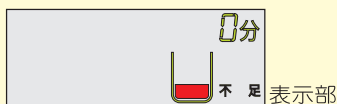


**⚠️ 注意**

スチーム噴出口から蒸気が出ている状態で収納しますと、湯滴が出てやけどをするおそれがあります。

9

排水つまみを「開」にしてください。表示部に水量不足の表示が出てから約1分後につまみを「閉」に戻し、完全に閉めてください。



**⚠️ 注意**

排水はコース終了後毎回行ってください。毎回排水をしないで使用を続けると、タンク内の排水口などがつまり、スチーム噴出口から湯滴が出てやけどをしたり、故障の原因ともなります。

10

排水トレーを取り出し、お湯を捨ててください。排水トレーの収納は完全に奥まで入れてください。



**⚠️ 注意**

排水トレーのお湯を捨てる際は十分に注意してください。高温のためやけどをするおそれがあります。



# テスラーステップ

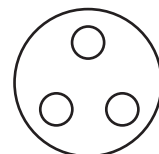
テスラー(テスラーマッサージ)のご使用方法

ガラス管で滑らすようにお肌をマッサージします。

ご使用前にP31の「スキントイプチャート」でご自分の肌質をお選びの上、P33からの「各ステップのお手入れ方法」と各肌質別「お手入れチャート」に記載されている使用時間・使用回数・使用方法を正しくお守りください。

1

テスラーを取り出し、テスラープラグ差込口にテスラープラグを差し込んでください。



テスラープラグ差込口

\* テスラープラグ差込口は、一定方向にしか差し込めません。

2

用途にあったガラス管を選び、テスラーと接続してください。接続する際は、テスラーとガラス管の溝を合わせ、ガラス管はソケットを持って差し込んでください。



**注意**

ガラス管を落としたりしますと破損し、破片が飛び散りけがをするおそれがあります。取り扱いには十分ご注意ください。

スプーン型  
お顔のマッサージ用



クシ型  
頭皮のマッサージ用



3

テスラースイッチを押して、テスラー表示ランプが点灯するのを確認してください。



4

出力調整ダイヤルを右にゆっくり回して、メーターの針が振れるのを確認してください。



# テスラーステップ

5

出力調整ダイヤルでP33からの「各ステップのお手入れ方法」と各肌質別「お手入れチャート」に記載されている出力度に調整してください。

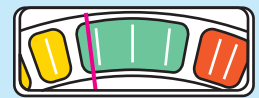


**⚠️ 注意**


レッドゾーンでは使用しないでください。発振部の故障や皮膚トラブルの原因となります。

## ●出力度

出力メーター弱 —— 出力メーターの針がグリーンゾーンの左側を指すぐらい



出力メーター普通 —— 出力メーターの針がグリーンゾーンのやや左側を指すぐらい

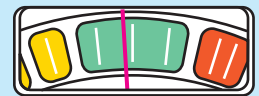

6

P10の「タイマーセット」に従って、P36からの各肌質別「お手入れチャート」に記載されている使用時間1～3分にセットしてください。ガラス管をお肌に当ててテスラーマッサージを行います。



**⚠️ 注意**

揮発性の高い整髪料などを塗布してテスラーマッサージを行ったり、放電させているガラス管にベンジンや除光液などは絶対に近づけないでください。引火するおそれがあります。

\* 整髪料はマッサージ後にご使用ください。

7

テスラーマッサージはファインスチームを浴びながら、ガラス管を軽く滑らすように行ってください。スチーム噴出口から30cm離れてご使用ください。



**⚠️ 注意**

一カ所に集中してテスラーマッサージを行ったり、目の回り・くちびるのお手入れなどはしないでください。

● ガラス管を強く押しつけると破損してけがをするおそれがあります。

8

設定時間の経過を知らせるメロディーが流れたら、スタート/ストップスイッチを押し、タイマーを切ってから、スチームスイッチ、テスラースイッチを切ってください。



\* 安全のためテスラースイッチは約5分経過すると自動的に切れます。

9

ご使用後はテスラーを上に向けて、ガラス管取り外しボタンを押しながら、ソケットを持って取り外してください。



**⚠️ 注意** ガラス管を下に向けて取り外しボタンを押ししないでください。落下して破損し、けがをするおそれがあります。

\* テスラーはテスラー収納トレーに、ガラス管はガラス管収納トレーに収納してください。

テスラーステップ

## オゾン発生について

テスラーマッサージの際に、ガラス管と皮膚接触部分にオゾンが発生しますが、使用時の吸入空気中のオゾン濃度は0.02ppm~0.04ppmと微量で、通常のご使用による弊害はありません。

備考：日・米等における労働環境基準では、1日8時間、1週40時間の正規の労働時間中反復暴露されても、健康に悪影響を及ぼさないオゾン許容濃度は、0.1ppmとされています。

# クリーナーステップ クリーナー(吸引式)のご使用方法

皮膚表面や毛穴の汚れを吸引して取り除きます。

ご使用前にP31の「スキントイプチャート」でご自分の肌質をお選びの上、P33からの「各ステップのお手入れ方法」と各肌質別「お手入れチャート」に記載されている使用時間・使用回数・使用方法を正しくお守りください。

1

クリーナーを取り出し、クリーナープラグ差込口にクリーナープラグを差し込んでください。

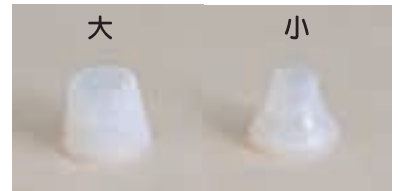


2

用途に合った吸引ゴムを選び、クリーナーに取り付けてください。




吸引ゴム  
大: 額・頬・あご用  
小: 鼻の回り用



3

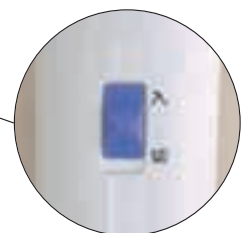クリーナーのスイッチを「入」にしてください。



**4** 吸引力の調節は吸引調整ツマミを回し、自分のお肌に合った吸引力にセットしてください。

#### 吸引調整ツマミ

弱:ツマミを「弱」の方向に回す  
強:ツマミを「強」の方向に回す



**5** お顔の中心から外側へ、クリーナーをご使用ください。



**⚠ 注意** 同じところを何度もかけたり、皮膚を無理に引っ張ったりしないでください。また、目の回り・くちびるのお手入れはしないでください。

**6** クリーナー終了後は、クリーナーのスイッチを「切」にしてください。収納する際は吸引ゴムを取り外し、汚れをよく落としてください。



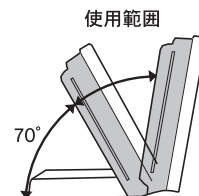
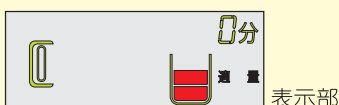
# 赤外線ステップ 赤外線のご使用方法

お顔に赤外線を当てて、皮膚温度を高めます。

ご使用前にP31の「スキントイプチャート」でご自分の肌質をお選びの上、P33からの「各ステップのお手入れ方法」と各肌質別「お手入れチャート」に記載されている使用時間・使用回数・使用方法を正しくお守りください。

1


赤外線取っ手を持ち赤外線を起こしてください。



\* 使用範囲(約70度以上)より下ではスイッチが入りません。

2

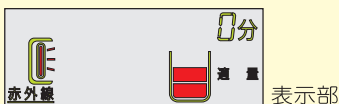赤外線スイッチを押してください。



**⚠️ 注意** 使用中や使用直後は赤外線カバーに触れないでください。高温でやけどをするおそれがあります。

● 赤外線を紙・ビニール・布などで覆わないでください。過熱して焼損し、火災のおそれがあります。



\* 赤外線とスチーマーとの同時使用はできません。

**3** P10の「タイマーセット」に従って、使用時間1分にセットしてください。使用する際は必ず専用アイガードを目に当て、30cm離れてご使用ください。



**⚠️ 注意** 付属の専用アイガードで必ず目を保護してください。

**4** 設定時間の経過を知らせるメロディーが流れたら、スタート/ストップスイッチを押し、タイマーを切ってから赤外線スイッチを切ってください。



\* 安全のため赤外線スイッチは約3分経過すると自動的に切れます。  
\* 赤外線は、終了後2~3分して、温度が下がってから収納してください。

## 全ステップ終了後には・・・

- 照明スイッチとコスミック・デュオ本器の電源スイッチを「切」にし、表示部の消灯を確認して電源プラグを家庭用電源のコンセントから抜いてください。
- タンク内を排水し、排水トレイのお湯を捨ててください。
- 本体フタを閉めた後、再度電源表示ランプの消灯を確認してください。
- コスミックスタンドをご利用の場合は、スタンドの電源プラグを家庭用電源のコンセントから抜いてください。

# 本器のお手入れ

各部のお手入れは次の方法で正しく行ってください。

**⚠️ 注意** お手入れは、必ず電源プラグを家庭用電源のコンセントから抜いて行ってください。

## コスミック・デュオ本器

プラスチック部分の汚れは、ぬるま湯か石けん水を含ませたやわらかい布で拭き取ってください。



**⚠️ 注意** シンナーなどの揮発性の高いもの・みがき粉・たわし・熱湯などは使用しないでください。プラスチックが変質したり傷が付きます。

## タンク内

排水後、タンク内の水滴は布で拭き取ってください。

タンク内の水垢は1年に1~2回の割合で、コメット美顔器専用の「タンク洗浄剤」で掃除してください。



**⚠️ 注意** タンク内の掃除には、紙質のものを絶対に使用しないでください。タンク内の排水口がつまり、スチーム噴出口から湯滴が出てやけどをしたり、故障の原因にもなります。

- タンク内の洗浄には家庭用洗剤など、専用の「タンク洗浄剤」以外のもを使用しないでください。
- 「タンク洗浄剤」をご使用の際は、洗浄剤の使用説明書に記載されている使用方法・注意事項をよくお読みの上正しくご使用ください。

## クリーナー吸引ゴムとスポンジ

クリーナー吸引ゴムは毎回クリーナーから取り外し、汚れをやわらかな布やティッシュペーパーで拭き取るか中性洗剤を使って洗ってください。



クリーナー吸引口内部にあるスポンジは、1か月に1回の割合で、ピンセットなどで取り出して洗浄し乾いた布などでよく水気を取ってから元に戻してください。





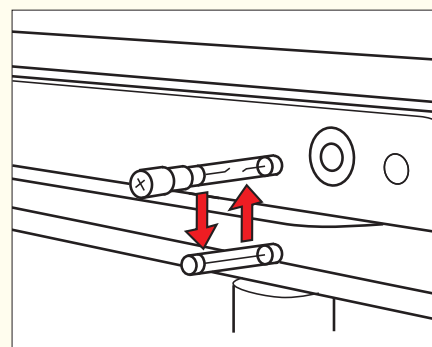
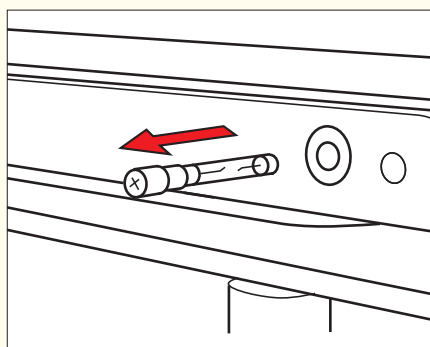
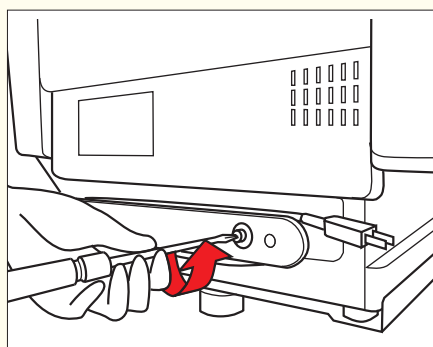
# 部品交換

各部のお手入れは次の方法で正しく行ってください。

**⚠ 警告** 交換方法が記載されている部分以外の交換や、本器を改造しての使用は絶対に行わないでください。

**⚠ 注意** 部品交換は、必ず電源プラグを家庭用電源のコンセントから抜いて行ってください。

## コスミック・デュオ 503 本体のヒューズ交換






**1** 503本体のうしろ側のヒューズホルダーを「+」ドライバーで左に回して開けてください。

**2** 古いヒューズを取り出してください。

**3** 付属の503本体用7Aヒューズと交換してください。

- ⚠ 注意**
- 付属のヒューズ以外は使用しないでください。
  - 付属の7Aヒューズはコスミック・デュオ503本体用です。10Aのコスミックスタンドのヒューズ交換には使用できません。
  - スタンドのヒューズ交換については、販売店またはマシンフリーダイヤルへご相談ください。

## 照明ランプの交換

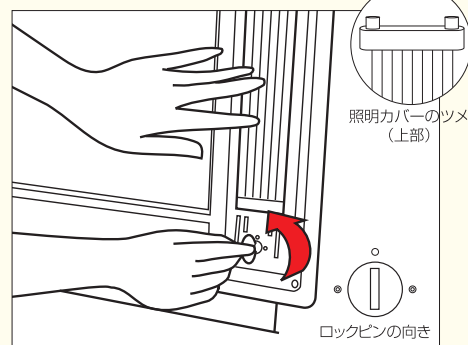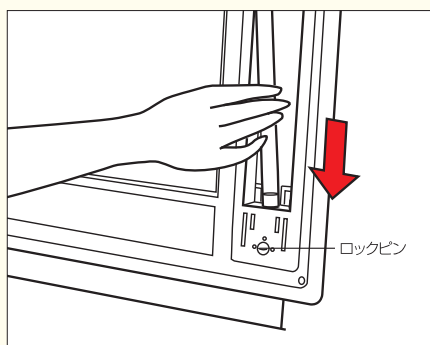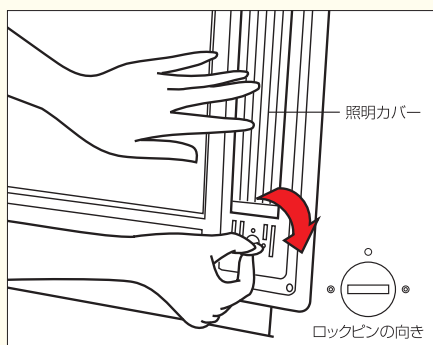

**1** コインまたは「-」ドライバーで照明カバーのロックピンを90度回し、照明カバーを手前に引いて取り外してください。

**2** 照明ランプを下に押しながらか取り外し、新しい照明ランプと交換してください。

**3** 照明カバーのツメを上部に差し込み、カバーを押さえながらロックピンを90度回して照明カバーを取り付けてください。

# その他

## 保管

### 日常の保管

■お子様の手に触れないように、各部品は所定の場所に正しく収納し、本体フタを閉じて付属の本体カバーをかけてください。

#### ⚠️注意

■お子様がガラス管を破損させたりして、けがをするおそれがありますので十分注意してください。

■湿気の多い場所や直射日光の当たる場所はさけてください。

### 長期の保管

■1カ月以上(長期間)使用しないときは、タンク内の水分を乾いた布で十分拭き取り、「日常の保管」の注意事項を守って保管してください。

■本器使用中または保管において、落下したり水につかった場合は、ご使用を中止し、販売店またはマシン フリーダイヤルへご相談の上、必ず点検にお出してください。

## アフターサービス

■本器には保証書を添付しております。保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認の上、大切に保管してください。

■保証期間はご購入日より3年間です。保証期間中は、保証書の記載内容によりコメット電機株式会社が修理いたします。

■保証期間経過後、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。その他詳細につきましては、保証書をご参照ください。保証期間経過後、または保証書を提示されない場合の修理などについてのご不明な点は、販売店またはマシン フリーダイヤルへご相談ください。

■ご愛用のお客様へのアフターサービス充実のため、お客様のデータをコンピューター登録いたします。ご結婚、ご転居などにより登録内容に変更があった場合は、登録変更届に必要な事項をご記入の上ご投函ください。

## 点検

■本器を長年ご愛用されて、プラグやコードに傷や変形があったり、タンクの排水ができないなど、異常が認められた場合は、故障や事故防止のため、使用を中止し、必ず販売店またはマシン フリーダイヤルへ点検についてご相談ください。

## 廃棄

■ガラス管や照明ランプを廃棄する際は、破損するおそれがあるので十分注意してください。

■コスミック・デュオ本器を廃棄する場合は、販売店またはマシン フリーダイヤルへご相談ください。

# 設定変更

本器は、「メロディ音量」「ブザー音量」「表示部の明るさ」の設定変更が可能です。なお、設定された内容は電源スイッチをOFFにしても記憶されています。

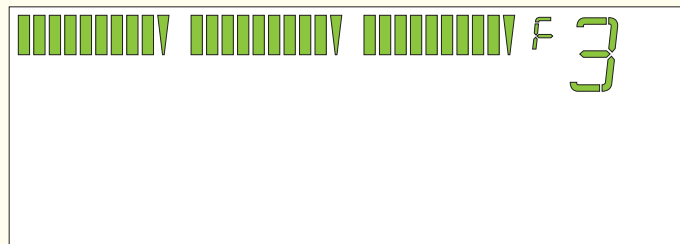
\*タイマー・スチーマー・赤外線が動作中は、設定変更ができません。

## 設定項目

設定の変更ができるのは右の4項目です。設定を開始・変更すると表示部に各設定項目ナンバーと現在設定されている目盛が表示されます。

設定項目	設定項目ナンバー
初期化設定	F 0
メロディ音量	F 1
ブザー音量	F 2
表示の明るさ	F 3


表示部例



\*表示部の明るさを「明るい」に設定した時の設定項目ナンバーと目盛表示です。

## 設定に使用するスイッチ

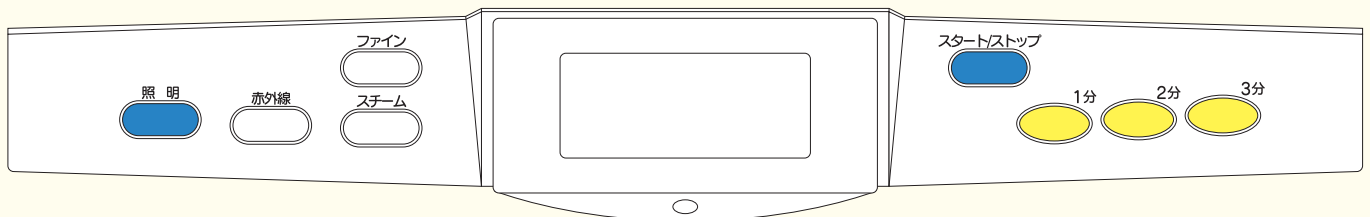設定の変更をするには、通常使用する操作パネルの5種類のスイッチを使用します。





# 設定変更

## ●メロディ音量を設定する

1 設定を開始します。 照明スイッチを押しながら  3分スイッチを押してください。表示部に設定項目ナンバー〈F1〉と現在設定されている音量の目盛が表示されます。

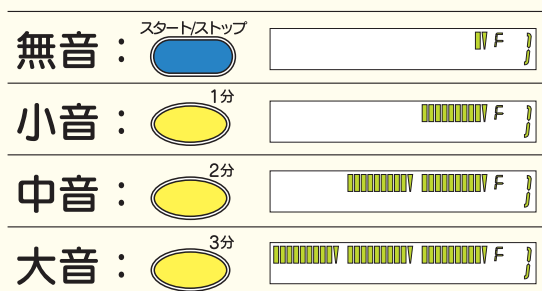2 次に、下記の4つの音量の中から好みのスイッチを押してください。変更された音量のメロディが鳴り、表示部には設定された下記の目盛が表示されます。





3 変更された音量でよろしければ、 照明スイッチを押してください。設定が決定され終了します。

## ●ブザー音量を設定する

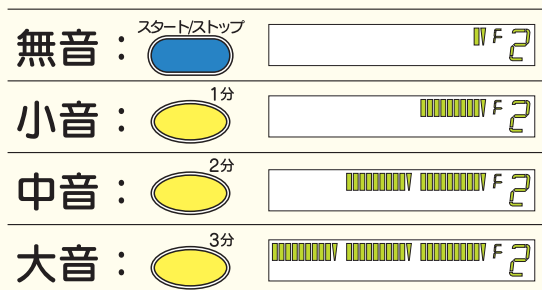1 設定を開始します。 照明スイッチを押しながら  2分スイッチを押してください。表示部に設定項目ナンバー〈F2〉と現在設定されている音量の目盛が表示されます。

2 次に、下記の4つの中から好みのスイッチを押してください。変更された音量のブザーが鳴り、表示部には設定された下記の目盛が表示されます。

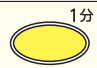

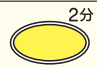

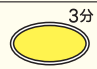




3 変更された音量でよろしければ、 照明スイッチを押してください。設定が決定され終了します。

## ●表示の明るさを設定する


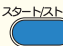
1 設定を開始します。 照明スイッチを押しながら  1分スイッチを押してください。表示部に設定項目ナンバー〈F3〉と、現在設定されている明るさの目盛が表示されます。


2 次に、下記の3つの明るさの中から好みのスイッチを押してください。表示部に変更された明るさの目盛が表示された後、その明るさで全灯します。

暗い：		
普通：		
明るい：		


3 変更された明るさでよろしければ、 照明スイッチを押してください。設定が決定され終了します。

## ●購入したときの状態に戻す(初期化設定)

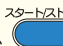1 設定を開始します。 照明スイッチを押しながら  スタート/ストップスイッチを押してください。表示部には設定項目ナンバー〈F0〉と表示されます。(目盛は表示されません。)

2 次にもう一度、 スタート/ストップスイッチを押してください。すべての項目が初期化設定になります。初期化設定の音量、明るさは次の通りです。(目盛は表示されません。)

メロディ音量：	中音
ブザー音量：	中音
表示の明るさ：	明るい

3 初期化に設定されました。 照明スイッチを押してください。設定が決定され終了します。

## 仕様

### コスミック・デュオ501／503

形 式	Cosmic・duo501	Cosmic・duo503	クリーナー
定格電圧	AC24V	AC100V	DC3V
定格周波数	50/60Hz	50/60Hz	
消費電力	22W(最大時)	ヒーター 500W ファイン 10W 赤外線 130W 照明ランプ 16.5W×2	1.2W
外形寸法	幅50cm×奥行37cm×高さ24cm		
全体重量	12kg		
付属品	専用アイガード／本体カバー／ケーブル		

- この美顔器は日本国内での使用を前提として、国内の安全基準に基づいて設計・製造されており、海外各国での安全規格等の適用を受けておりません。よって、この美顔器の海外への持ち出しおよび海外でのご使用により生じた事故・損害等に対し、直接・間接を問わず一切の責任を免除させていただきます。

### コスミックスタンド(トレイ付)

寸 法	幅51cm×奥行49cm×高さ61.5cm
重 量	11kg

## 部品価格 (税込価格)

スプーン型ガラス管	¥3,500
クシ型ガラス管	¥4,200
照明ランプ	¥2,000

- 仕様、価格、外観は予告なく変更することがありますのでご了承ください。