

取扱説明書

コメット美顔器

Cosmic *MIEUX*
705/706

コスミックミュー 705/706

ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
また、いつも手元に置いてご使用ください。



Comet®

Cosmic MIEUX 取扱説明書/もくじ
705/706

コスミックミュー 705/706

ご使用
いただく前に





- P1 安全上のご注意
- P2 ご使用の前に
- P4 安全にご使用いただくために

本器の取扱いについて

はじめに

- P6 各部の名前と機能
- P8 ご使用前の準備

ご使用方法


- P10  スチームステップ
- P13  テスラーステップ
- P15  クリーナーステップ
- P17  赤外線ステップ
- P18 全ステップが終了したら…
- P19 設定変更〈メロディー音量・ブザー音量〉
- P22 Q&A〈こんなときには…〉
- P24 本器のお手入れ〈本体・タンク内・クリーナー/吸引ゴム…〉
- P25 ヒューズ交換
- P26 その他〈保管・アフターサービス…〉

スキンケアについて

スキンケアを
はじめる前に

- P28 スキンタイプチャート〈肌質判定チャート〉
- P29 パッチテスト

お手入れ
チャート

- P30  敏感肌の方用〈お手入れチャート〉
- P32  混合肌の方用〈お手入れチャート〉
- P34  乾性肌の方用〈お手入れチャート〉
- P36  脂性肌の方用〈お手入れチャート〉
- P38  普通肌の方用〈お手入れチャート〉
- P40  妊娠中の方用〈お手入れチャート〉
- P42 ステップ別お手入れ方法

安全上のご注意

このたびは[コスミック ミュー]をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。なお、ここに示した注意事項は本器を安全に正しくご使用いただき、あなたや周りの人々への危険や損害を、未然に防止するためのものです。誤った取扱いをすると生じることが予想される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。

いずれも安全のために必ずお守りください。



危険

死亡や重傷などの人身事故の原因となる可能性が高く想定される場合。



警告

死亡や重傷などの人身事故の原因となる可能性が想定される場合。



注意

傷害などの人身事故や、家財などに損害を与える原因となる可能性が想定される場合。




⊘ 記号は、**してはいけない**行為であることを告げるものです。具体的な内容は、⊘ の絵の中に表示したり近くに説明で示してあります。(左図の場合は分解してはいけないことを意味します。)




● 記号は、**しなければならない**ことを伝えるものです。具体的な内容は、● の絵の中に表示したり近くに説明で示してあります。(左図の場合はプラグをコンセントから抜かなければならないことを意味します。)

本書をお読みになった後は、ご使用者がいつでも見られるところに、大切に保管してください。


警告ラベル表示位置

本器には危険に対する情報を記載した警告ラベルが、イラストの  位置に貼付してあります。

〈正面〉

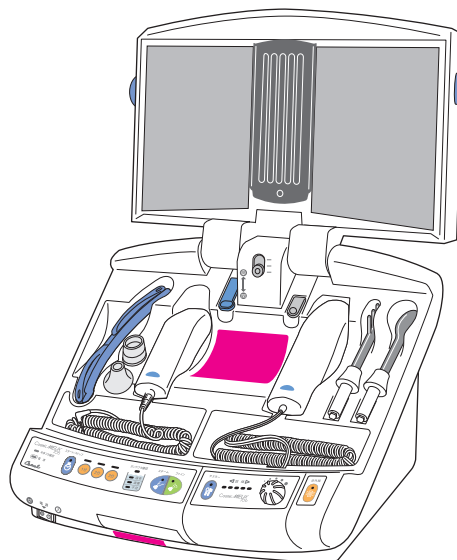

〈後面〉

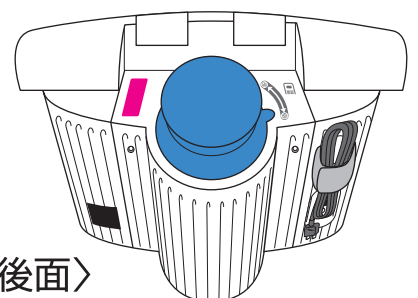

ご使用の前に

安全のために必ずお守りください。

⚠ 危険

■下記のような医療電子機器との併用はしない。

下記のような医療用電子機器との併用は、電子機器に誤作動を招くおそれがありますので、絶対に使用しないでください。

- ペースメーカーなどの体内植(埋)込型医療用電子機器
- 心電計などの装着型医療用電子機器

⚠ 警告

■下記のような方は医師と相談する。

何らかの病気で通院加療中の方、下記の治療を受けている方、体内に金属などを使用している方は、必ず医師とこの美顔器によるお手入れについてご相談のうえご使用ください。

- 心臓に障害のある方、血圧に異常のある方、悪性腫瘍のある方、知覚障害のある方。

■皮膚科通院中、または皮膚科の薬を使用の方は、本器を使用しない。

■本器を治療目的として使用しない。

本器は顔のお手入れをするための美顔器です。それ以外の目的でご使用になると、事故やトラブルの原因となります。

⚠ 注意

■子供には使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

■肌質によりお手入れ方法が異なる。

ご使用の前にP28の「スキントイプチャート」によりご自分の肌質をご確認のうえP30からの各肌質別「お手入れチャート」に記載されている使用時間・使用回数・使用方法をよく守り、使いすぎないようにご注意ください。

- 体調が悪い時、身体に異常を感じる時は、美顔器によるお手入れをお休みください。
- 「スキントイプチャート」で肌質をご確認できなかつたり、わからない場合は無理にご使用にならず、販売店またはスキンケアフリーダイヤルまでお問い合わせください。

■妊娠中はP40の「妊娠中の方用」コースで使用する。

■皮膚に炎症(日焼け・赤み・ブツブツ・かゆみなど)があるときは本器を使用しない。

■皮膚の弱い方、アレルギー体質の方は無理をせず、販売店またはスキンケアフリーダイヤルへ相談する。

■本器をご使用中、皮膚に異常を感じたときはただちに使用を中止し、販売店またはスキンケアフリーダイヤルへ相談する。

スキンケアフリーダイヤル ☎ 0120-240-114


⚠ 注 意

本器の持ち方について

- 本器を持つときは本体フタを閉め、本体両側面の下部(凹部分)を持つ。
- 他の箇所を持ちますと、安定せずに落とす場合があります。足などをけがしたり故障の原因となります。(本体重量は8.9kg)



必ず守る

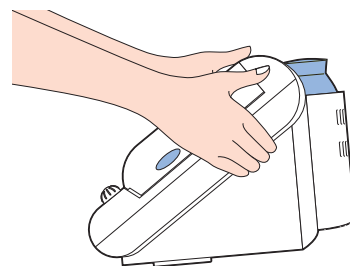


設置について

- 水平な場所で使用する。
- ぐらついた台の上や傾いた場所は、落ちたり倒れたりして危険です。



必ず守る

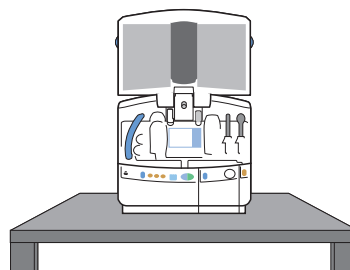


- 湿気・ほこりのある所や、極端に温度の高い所では使用しない。

- お風呂場や洗濯機のそばなど水のかかる場所、湿気・湯気・ほこりの多い場所や、ストーブのそばなどに置きますと、故障したり火災の原因となります。



高湿保管禁止

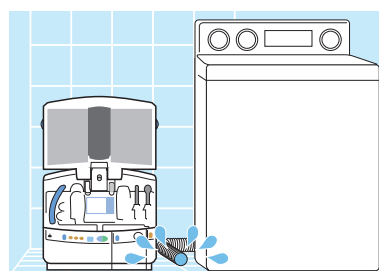


- テレビ・ラジオなど、周辺の機器から1メートル以上離れて使用する。

- 放電しているガラス管を、周辺の機器に接触させたり間近で使用しますと、機器が誤作動するおそれがあります。なお、1メートル以上離れても周辺の機器に雑音が入る場合がありますが、影響はありません。



必ず守る

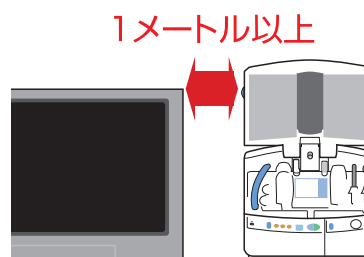

安全にご使用いただくために〈取扱上の注意〉

警告


コスミック ミュー本器

■引火性の物の近くで使用しない。

- 引火性の物の近くで使用したり、本器の収納トレーなどにベンジンや除光液など揮発性の高いものは置かないでください。引火し、やけどや火災の原因となります。



禁止

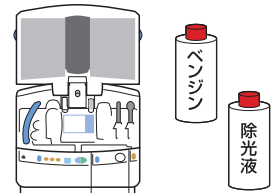


改造の禁止

■本器を改造しない。

- 本器を改造してのご使用は絶対に行わないでください。P25の「ヒューズ交換」で指定した以外の内部には絶対に触れないでください。



分解禁止

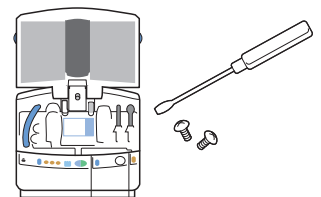

注意

電源


■家庭用電源 (AC100V) で使用する。

コスミックミュー706本体は専用アダプター (AC24V) で使用する。

- ほかの電源でのご使用は、故障・火災などの原因となります。



必ず守る

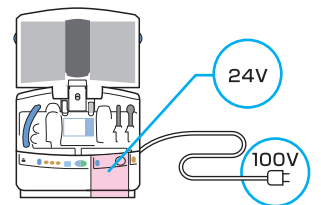

電源コード・電源プラグ

■電源コードを無理に折り曲げたりしない。

- 電源コードを無理に折り曲げたり、重い物をのせたり、はさみ込んだりしないでください。コードが破損し、発火・感電の原因となります。


■電源コードを抜くときは必ずプラグ部分を持つ。

- 電源コードを抜くときは、電源コードを引っばらず、必ずプラグ部分を持って抜いてください。


* 電源コードの破損、プラグの接触不良にお気づきの際は直ちに使用を中止し、マシン フリーダイヤルへご連絡ください。



禁止

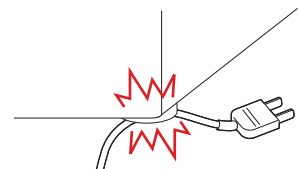

電源プラグを抜く

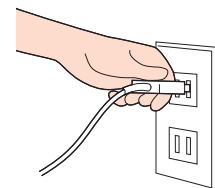

タンクの注水と排水

■必ず付属の計量カップを使用する。

■適量範囲上限を超えてタンクに注水しない

- スチームスイッチが入らなかったり、スチーム噴出口から湯滴が出てやけどをするおそれがあります。

■タンクには水以外のもの (香料など) は入れない。


- やけどや故障の原因となります。

■タンク内の排水は、使用後毎回行う。

- 毎回排水をしないで使用を続けると、タンク内の排水口などがつまり、スチーム噴出口から湯滴が出てやけどをしたり、故障の原因となります。



必ず守る

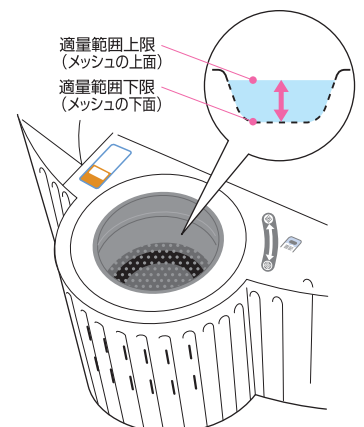

適量範囲上限
(メッシュの上面)
適量範囲下限
(メッシュの下面)

⚠ 注意

タンクの注水と排水

■排水トレイのお湯を捨てる際は注意する。

- 高温のためやけどをするおそれがあります。

スチーマー・タンクフタ

■スチーマーの使用中は、スチーム噴出口に触れない。

- 高温のためやけどをするおそれがあります。

■スチーマーの使用中は、スチーマーの角度を変えない。

- スチーム噴出口から湯滴が出てやけどをするおそれがあります。


■スチーマーの使用中や使用直後は、タンクフタを開けない。

- 熱湯でやけどをするおそれがあります。


※スチーム噴出口が詰まるなど、タンク内が過圧すると、安全機能が作動し、タンクフタ側面から蒸気がでます。その場合には、やけどをするおそれがありますのでタンクフタには触れず、すぐに電源スイッチを切り、マシンフリーダイヤルへご連絡ください。



禁止

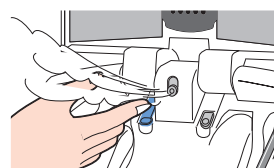

禁止

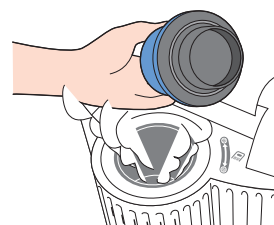

ガラス管

■ガラス管に揮発性の高いものを近づけない

- 揮発性の高い整髪料などを塗布してガラス管マッサージを行ったり、放電しているガラス管にベンジンや除光液などを絶対に近づけないください。放電しているガラス管が、揮発性の高いものに触れると引火し、やけどの原因になります。

■ガラス管を落としたり、ぶつけない。


- 破損し破片が飛び散り、けがをするおそれがあります。落としたりぶつかったりした際、使用可能な状態でも、ガラス管の表面にひびが入っている場合があります。表面をよく確認し、ひびなどがありましたらご使用を中止してください。

■ガラス管は強く押しつけない。


- 強く押しつけると破損してけがをするおそれがあります。



禁止

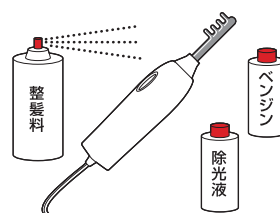

禁止

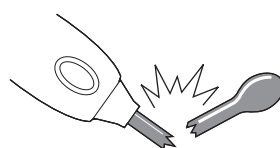

赤外線

■赤外線の使用直後は、赤外線カバーには触れない。


- 高温でやけどをするおそれがあります。

■赤外線を紙・ビニール・布などで覆わない。


- 過熱により発火し、火災のおそれがあります。




禁止

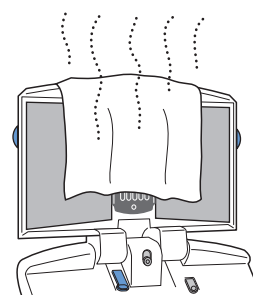


各部の名前と機能

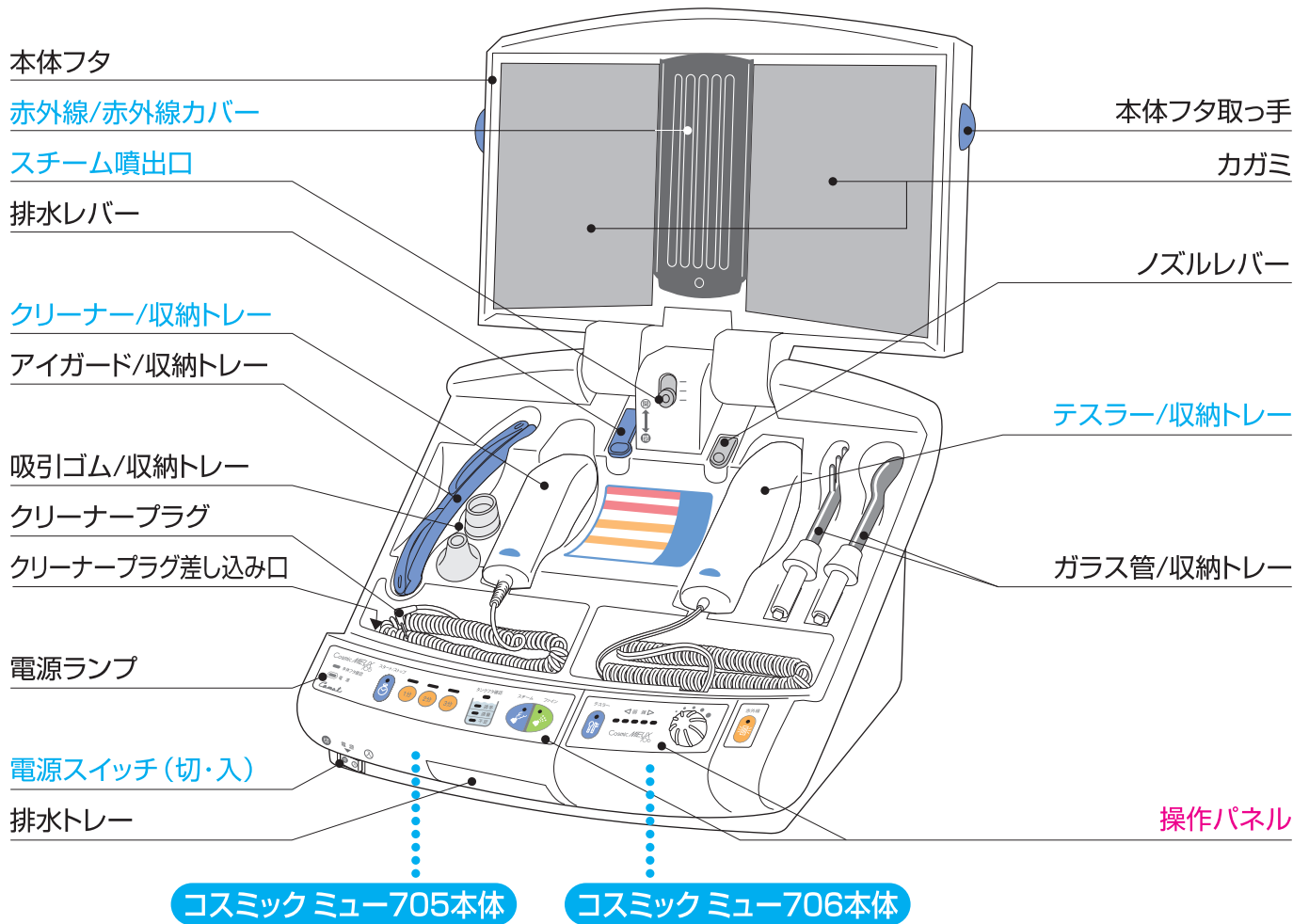

705本体うしろ側

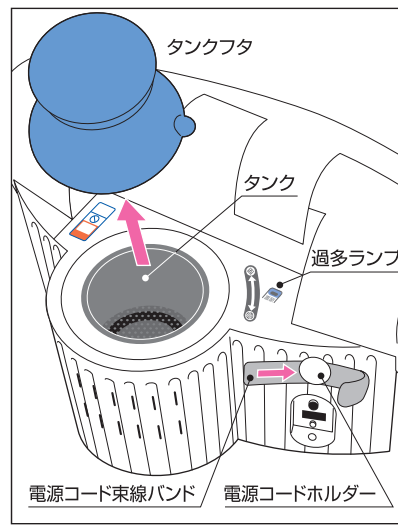


706本体うしろ側

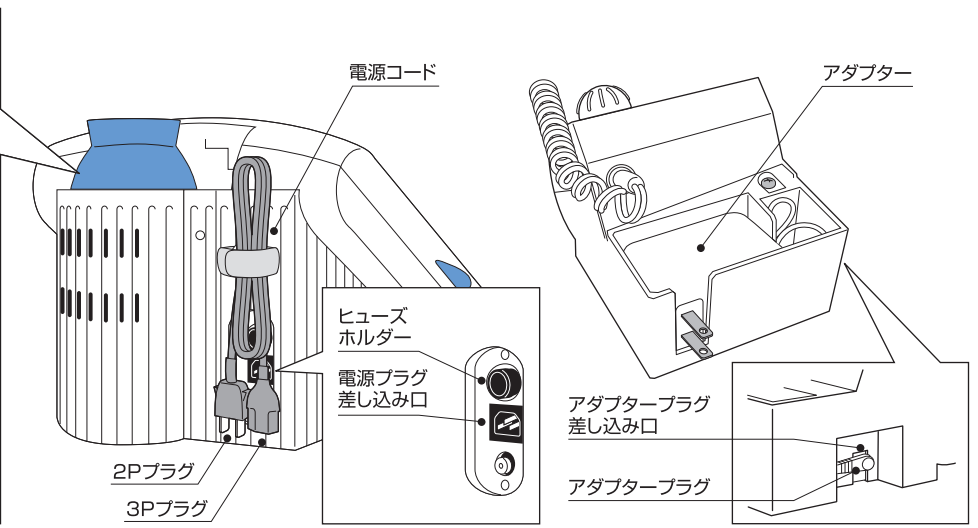

テスラー（ガラス管マッサージ用）


ガラス管取り外しボタン

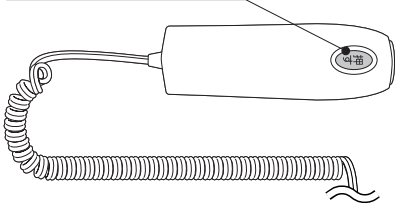

（本体に接続されています。）

ガラス管


●スプーン型ガラス管

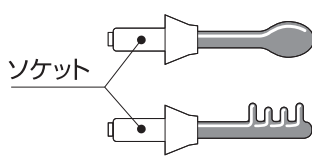

●クシ型ガラス管

クリーナー

電源スイッチ

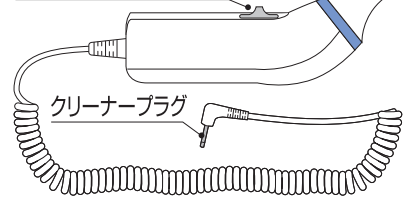

付属品



専用アイガード

計量カップ

本体カバー

ケーブル

電源コード


吸引ゴム



操作パネルの各名称と操作方法

本体操作部

テスラー操作部

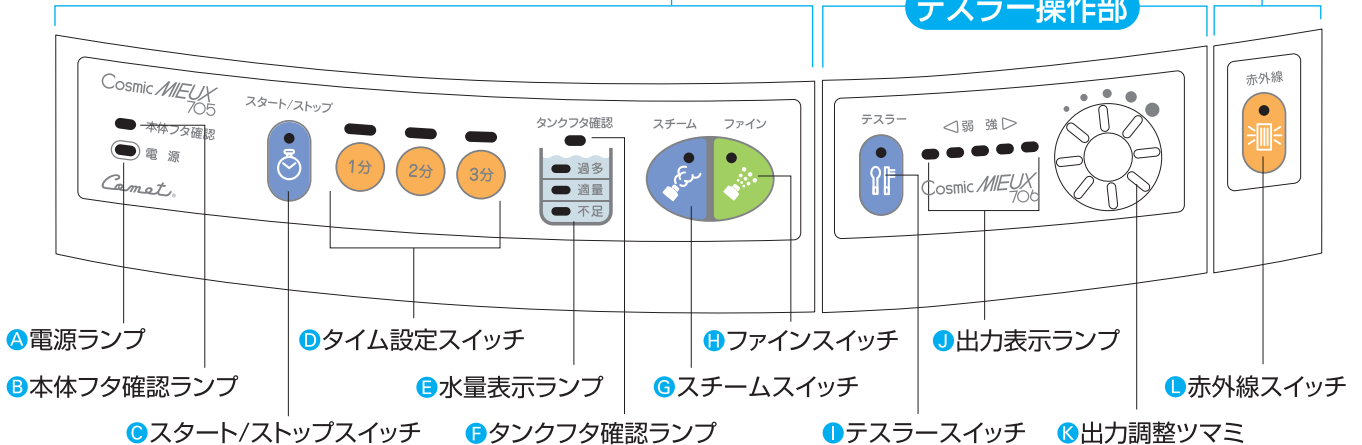

A 電源ランプ

スイッチを「入」にすると点灯します。

B 本体フタ確認ランプ

点灯時は本器がご使用になれません。

C スタート/ストップスイッチ

スイッチを押すとタイマーが作動し、もう一度押すと終了します。

D タイム設定スイッチ

各スイッチを押すと使用時間が設定されます。

E 水量表示ランプ

タンク内の水量が3段階で表示されます。

F タンクフタ確認ランプ

タンクフタが閉まっていない場合に点灯します。

G スチームスイッチ

スイッチを押すとスチーマーが作動し、もう一度押すと終了します。

H ファインスイッチ

スイッチを押すとファインが作動し、もう一度押すと終了します。

I テスラースイッチ

スイッチを押すとテスラーが作動し、もう一度押すと終了します。

J 出力表示ランプ

テスラーの出力度を表示します。

K 出力調整ツマミ

テスラーの出力度を調整します。

L 赤外線スイッチ


スイッチを押すと赤外線が作動し、もう一度押すと終了します。

ご使用前の準備

本器のセット


1 電源プラグを本体とコンセントに接続する。

付属の電源コードの3Pプラグを、本体うしろ側の電源プラグ差し込み口に、2Pプラグを家庭用電源(AC100V)のコンセントに、それぞれ差し込んでください。

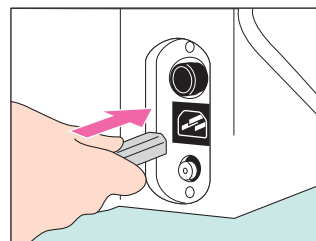

2 電源スイッチを「入」にする。



本体左下部の電源スイッチを「入」にして、電源・本体フタ確認・水量「不足」の各ランプ点灯を確認してください。

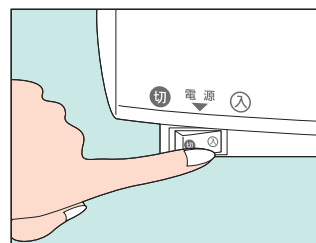

3 本体フタを開ける。

本体フタ両側の取っ手に指を当て、本体フタを使用範囲まで開けます。

〈本体フタ確認ランプが消灯すると使用範囲となります。〉

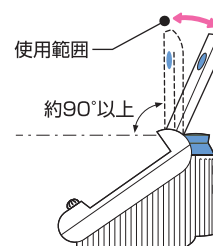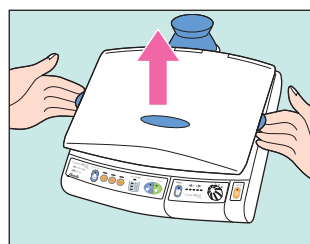


🕒 タイマーセット

各ステップでは、使用時間厳守のためタイマーをご使用ください。各ステップにはいる前に、あらかじめタイマーの操作方法をよく理解してください。なお、タイマーは他の機能とは連動していません。

1 使用時間をセットする。

タイム設定スイッチを押して使用時間をセットします。


〈設定時間までのランプが点灯します。〉

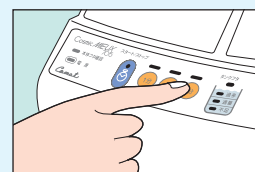

2 スタート/ストップスイッチを押す。

①「スタート/ストップ」スイッチを押します。〈スタート/ストップのランプが点灯します。〉

②設定時間のランプが点滅しタイマーが作動します。1分経過するとランプが消灯し、次のランプが点滅します。

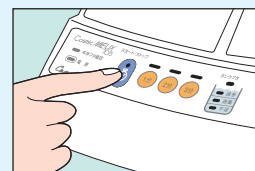

3 設定時間が経過するとランプが消灯し、メロディーが流れる。





4 メロディーが流れたらスタート/ストップスイッチを押し、タイマーを切る。

タイマーの設定変更

タイマーが作動し始めてから設定変更したい場合は、一度「スタート/ストップ」スイッチを押し、タイマーを切ってから、もう一度設定します。

Cosmic MIEUX
705/706

ご使用方法

- P10  スチームステップ
- P13  テスラーステップ
- P15  クリーナーステップ
- P17  赤外線ステップ
- P18 全ステップが終了したら…
- P19 設定変更〈メロディー音量・ブザー音量〉
- P22 Q&A〈こんなときには…〉
- P24 本器のお手入れ〈本体・タンク内・クリーナー/吸引ゴム…〉
- P25 ヒューズ交換
- P26 その他〈保管・アフターサービス…〉

Cosmic MIEUX
705/706



スチームステップ

スチーマー(ファインスチーム)のご使用方法

お顔全体に^{スチーム}微粒子の蒸気を浴びます。


ご使用の前にP28の「スキントイプチャート」でご自分の肌質をご確認のうえ、P30からの各肌質別「お手入れチャート」と「ステップ別お手入れ方法」に記載されている使用時間・使用回数・使用方法を正しくお守りください。

タンクへの注水 ※必ず付属の計量カップをご使用ください。

1 排水の確認。

〈注水の前に〉

- ①排水レバーを上げて、タンク内の残水を全て排水してください。
- ②本体フタを閉じてください。

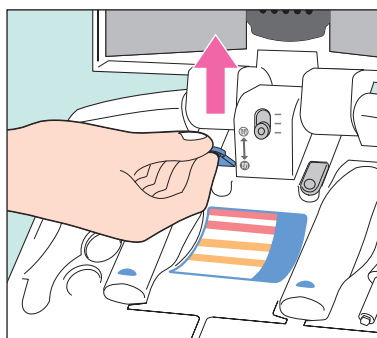


⚠ 注意

計量カップは洗剤で洗わないでください。洗剤が少量でもタンク内に入ると、スチーム噴出口から湯滴が出てやけどや故障の原因となります。

2 計量カップに水を入れる。


計量カップの適量範囲内まで水を入れてください。

計量カップ	タンク内水位	使用時間
適量範囲上限▲	メッシュ上面	約20分
// 下限▼	メッシュ下面	約10分

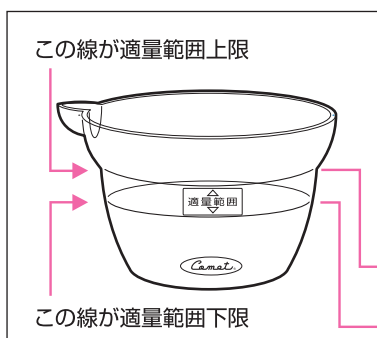


※水位の上限を超えて、「過多」のランプが点灯した場合

排水レバーを上げ、「適量」ランプが点灯するまで排水したら、排水レバーを下げてください。

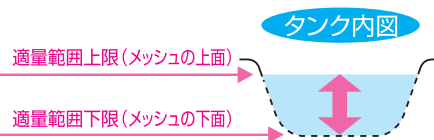

3 計量カップの水を注水する。

- ①タンクフタの突起部が本体「開」に合うように左へ回してタンクフタを開けます。
〈タンクフタ確認ランプ点灯〉
- ②計量カップの水をタンクに注水します。
〈適量ランプ点灯〉

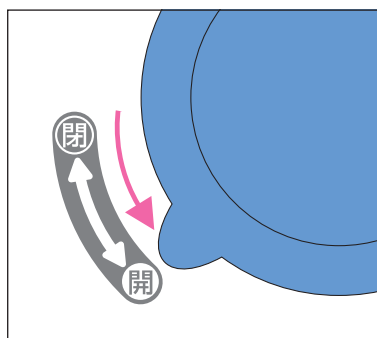


⚠ 注意

タンクに水以外のもの(香料など)を入れないでください。スチーム噴出口から湯滴が出てやけどや故障の原因となります。

4 タンクフタを閉める。

タンクフタの突起部を本体の「開」に合わせてフタを入れてから、「閉」に合うように右に回してタンクフタを閉めます。

〈タンクフタ確認ランプ消灯〉

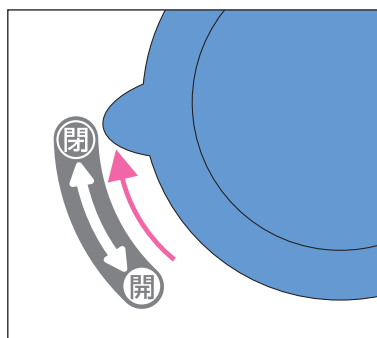



⚠ 注意

蒸気漏れの危険がありますので、タンクフタはしっかりと閉めてください。

スチーマー操作

1 本体フタを開ける。

本体フタ両側の取っ手に指を当て、本体フタを使用範囲まで開けます。
 〈本体フタ確認ランプが消灯すると使用範囲となります。〉

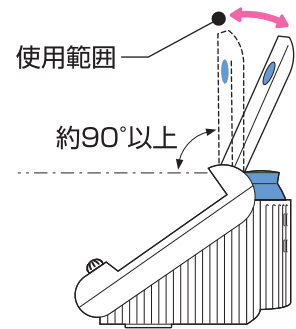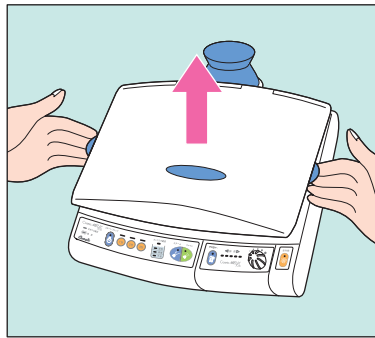


⚠ 注意

スチーマーの使用中や使用直後はタンクフタを開けないでください。熱湯でやけどをするおそれがあります。


2 「スチーム」スイッチを押す。

〈スチームランプ点灯〉

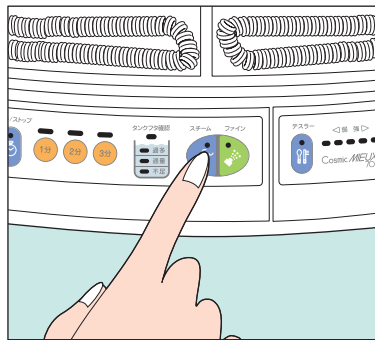

3 「ファイン」スイッチを押す。

スチームが出てきたら、「ファインスイッチ」を押します。
 〈ファインランプ点灯〉

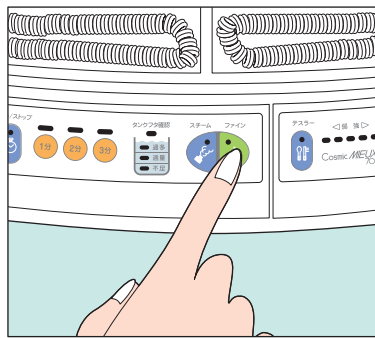


⚠ 注意

ノズルレバーの角度はスチームが顔に浴びない状態で調整してください。スチーム噴出口から湯滴が出てやけどをするおそれがあります。

4 ノズルレバーの角度を調整する。

ノズルレバーをゆっくり上下に調整し、使いやすい位置にセットします。
 〈スチーム噴出口の角度は、本体フタを閉めても変わりません〉

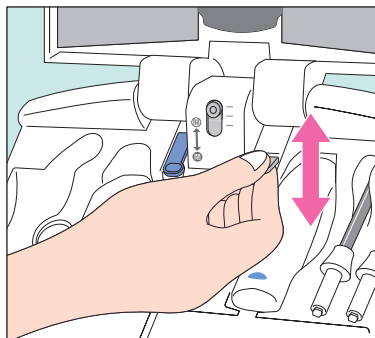

STEAM STEP


🇸🇯 スチームステップ

5 「お手入れ」

タイマーをP8の「タイマーセット」に従って、使用時間1～3分にセットし、噴出口から30cm離れて使用します。

〈30cmの目安〉

鏡の左右、上下の中心に顔が写る位置。

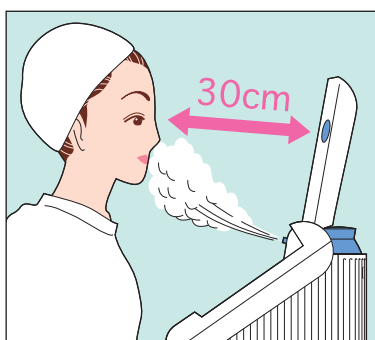


⚠️ 注意

スチーマーの使用中は、スチーム噴出口に顔を近づけすぎないでください。噴出口から20cm以内のスチームは高温で、やけどをするおそれがあります。

6 設定時間が経過したら。

タイマーの設定時間の経過を知らせるメロディーが流れたら、スタート/ストップスイッチを押し、タイマーを切ってから、スチームスイッチを押し、スチームの噴出を止めます。

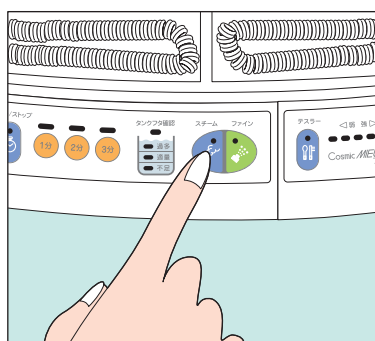


⚠️ 注意

スチーム噴出口からスチームがでている状態で、本体フタを閉めないでください。故障の原因となります。

7 タンクのお湯を排水する。

スチーマー終了後、4～5分お湯をさましてから、排水レバーを上げ、タンク内のお湯を排水します。

〈排水時間は約10秒〉

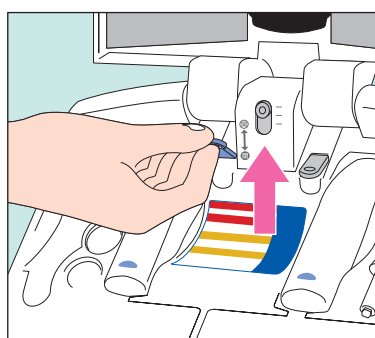

⚠️ 注意

排水はコース終了後、毎回行ってください。毎回排水をしないで使用を続けると、タンク内の排水口などがつまり、スチーム噴出口から湯滴が出てやけどをしたり、故障の原因にもなります。

🔌 テスラーステップ | テスラー(テスラーマッサージ)のご使用方法


ガラス管で滑らすようにお肌をマッサージします。

ご使用前にP28の「スキンタイプチャート」でご自分の肌質をご確認のうえ、P30からの各肌質別「お手入れチャート」と「ステップ別お手入れ方法」に記載されている使用時間・使用回数・使用方法を正しくお守りください。

テスラー操作

1 ガラス管を接続する。

用途にあったガラス管をテスラーに接続します。接続する際は、テスラーとガラス管の溝を合わせ「カチッ」と音がするまで差し込みます。

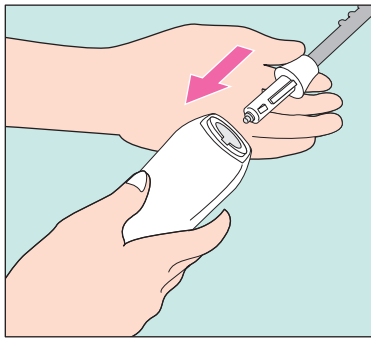

⚠️ 注意

ガラス管を落としたりしますと破損し、破片が飛び散りけがをするおそれがあります。取扱いには十分ご注意ください。

●スプーン型
お顔のマッサージ用




●クシ型
頭皮のマッサージ用




2 「テスラー」スイッチを押す。

〈テスラーランプ点灯〉

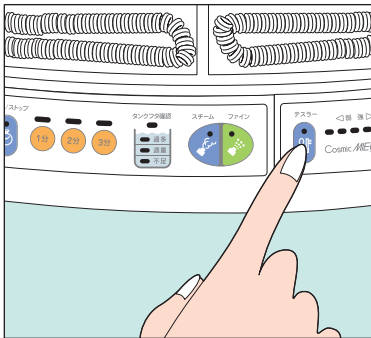

3 出力の調整をする。

出力調整ツマミを右にゆっくり回して、出力調整をします。

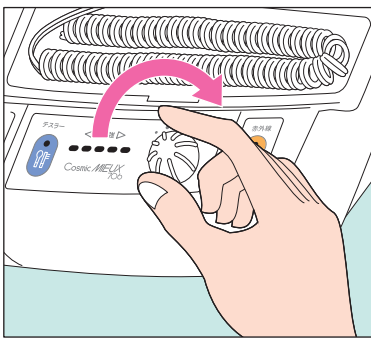

〈出力の目安〉

●出力度「弱」……

「黄色」及びひとつ目の「グリーン」ランプが点滅または、
点灯するレベル




●出力度「普通」……

ふたつ目の「グリーン」ランプが点滅または、
点灯するレベル



4 タイマーをセットする。

タイマーをP8の「タイマーセット」に従って、使用時間1～3分にセットします。

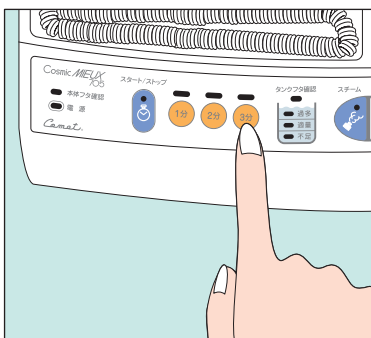


🔑 テスラーステップ

5 「お手入れ」

ファインスチームを浴びながら、ガラス管を軽く滑らすようにテスラーマッサージを行います。スチーム噴出口から30cm離れて使用します。

〈30cmの目安〉

鏡の左右、上下の中心に顔が写る位置。

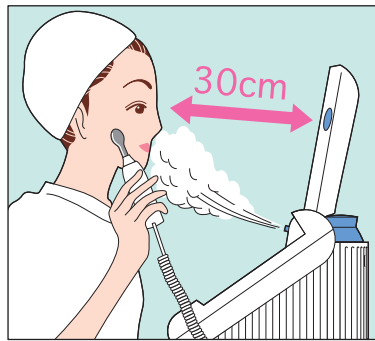

⚠️ 注意


1カ所に集中してテスラーマッサージを行ったり、目の回り・くちびるのお手入れなどはしないでください。

揮発性の高い整髪料などを塗布してテスラーマッサージを行ったり、放電させているガラス管にベンジンや除光液などは絶対近づけないでください。引火するおそれがあります。

6 設定時間が経過したら。

タイマーの設定時間の経過を知らせるメロディーが流れたら、スタート/ストップスイッチを押し、タイマーを切ってから、スチームスイッチ、テスラースイッチを押し、終了させます。

※テスラースイッチは、約5分経過すると自動的に切れます。

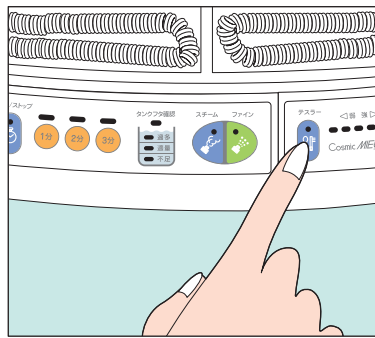


⚠️ 注意

テスラーを下に向けて取り外しボタンを押さないでください。落下して破損し、けがをするおそれがあります。

7 ガラス管を取り外す。

ご使用後はテスラーを上に向けて、「ガラス管取り外しボタン」を押しながらガラス管ソケットを持って取り外します。その後ガラス管、テスラーを所定の位置に収納します。

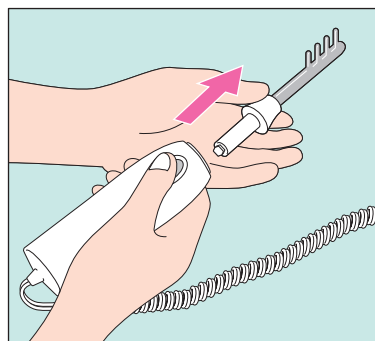

オゾン発生について

テスラーマッサージの際に、ガラス管と皮膚接触部分にオゾンが発生しますが、使用時の吸入空気中のオゾン濃度は0.02ppm～0.04ppmと微量で、通常のご使用による弊害はありません。

(備考) 日・米等における労働環境基準では、1日8時間、1週40時間の正規の労働時間中反復暴露されても、健康に悪影響を及ぼさないオゾン許容濃度は0.1ppmとされています。

クリーナーステップ | クリーナー(吸引式)のご使用方法


皮膚表面や毛穴の汚れを吸引して取り除きます。

ご使用前にP28の「スキントイプチャート」でご自分の肌質をご確認のうえ、P30からの各肌質別「お手入れチャート」と「ステップ別お手入れ方法」に記載されている使用時間・使用回数・使用方法を正しくお守りください。

クリーナー操作


1 プラグを差し込む。

クリーナープラグ差し込み口にクリーナープラグを差し込みます。

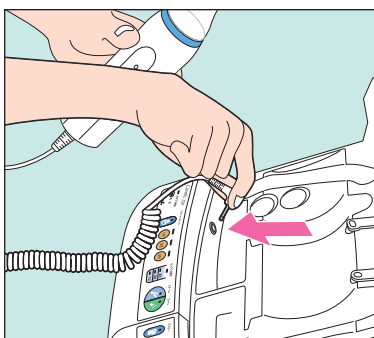

2 吸引ゴムを取り付ける。

用途にあった吸引ゴムをクリーナー本体に取り付けます。

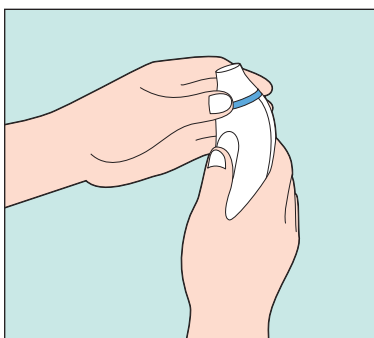

●大: 額・頬用




●小: あご・鼻の周り用



3 スイッチを入れる。

スイッチは上が吸引力「強」、下が吸引力「弱」となります。ご自分のお肌に合うようにセットしてください。

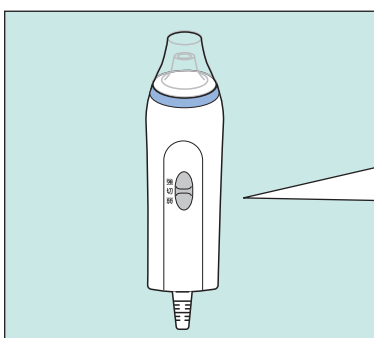

強
切
弱

4 「お手入れ」

お顔の中心から外側へ、クリーナーを使用します。



⚠ 注意

同じ所を何度もかけたり、皮膚を無理に引っ張ったりしないでください。また、目の回り、くちびるのお手入れはしないでください。


C L E A N E R S T E P

クリーナーステップ

5 終了したら。

使用後はクリーナースイッチを「切」にし、クリーナー本体、吸引ゴムを所定の位置に収納します。

〈コードがトレイ内にきちんと収まっていることを確認してください。〉

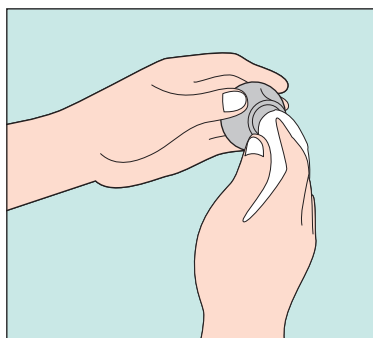

収納する際は吸引ゴムを取り外し、汚れをよく落としてください。

赤外線ステップ | 赤外線のご使用方法


お顔に赤外線を当てて、皮膚温度を高めます。

ご使用の前にP28の「スキントイプチャート」でご自分の肌質をご確認のうえ、P30からの各肌質別「お手入れチャート」と「ステップ別お手入れ方法」に記載されている使用時間・使用回数・使用方法を正しくお守りください。

赤外線操作

1 スイッチを入れる。

「赤外線」スイッチを押します。
 <赤外線スイッチランプ点灯>

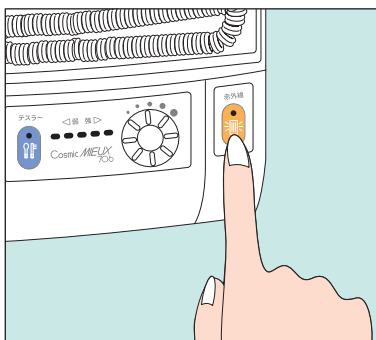


⚠ 注意

使用中や使用直後は赤外線カバーに触れないでください。高温でやけどをするおそれがあります。

赤外線を紙・ビニール・布などで覆わないでください。過熱により発火し、火災のおそれがあります。

2 タイマーをセットする。

タイマーをP8の「タイマーセット」に従って、使用時間1分にセットします。

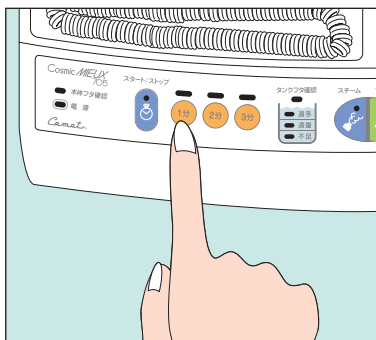

⚠ 注意

付属の専用アイガードで必ず目を保護してください。


3 赤外線を当てる。

専用アイガードで目を覆い、30cm離れて赤外線を当てます。

<30cmの目安>

鏡の左右、上下の中心に顔が写る位置。


<赤外線とスチーマーの同時使用はできません。>

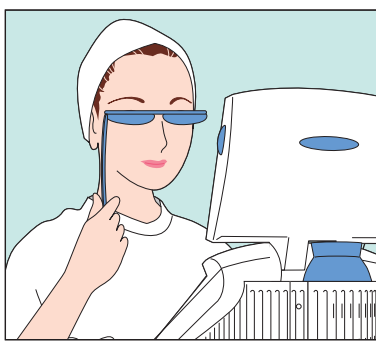

4 設定時間が経過したら。


タイマーの設定時間の経過を知らせるメロディーが流れたら、スタート/ストップスイッチを押し、タイマーを切ってから、赤外線スイッチを押し、終了させます。

※赤外線は約3分経過すると自動的に切れます。

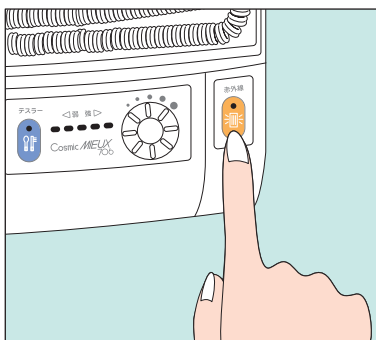

全ステップが終了したら…

1 本体フタを閉じる。

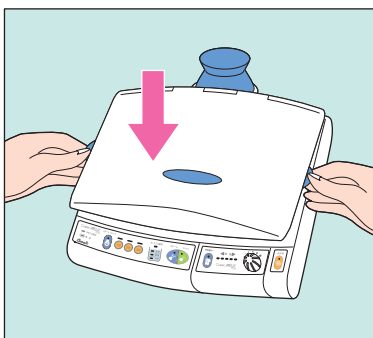


⚠ 注意

赤外線使用直後の場合は、2～3分経過して赤外線の温度が下がってから本体フタを閉じてください。


2 電源スイッチを「切」にする。

本体左下部の電源スイッチを「切」にして電源・本体フタ確認・水量「不足」の各ランプ消灯を確認してください。

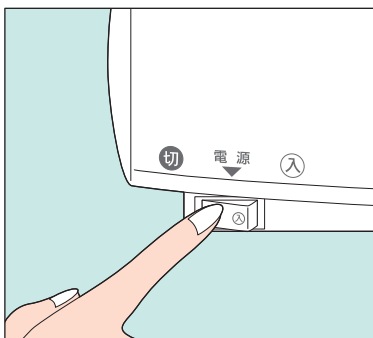


3 電源プラグを抜く。

電源コードの2Pプラグを、家庭用電源(AC100V)のコンセントから、3Pプラグを本体うしろ側の電源差し込み口から、それぞれ抜いてください。

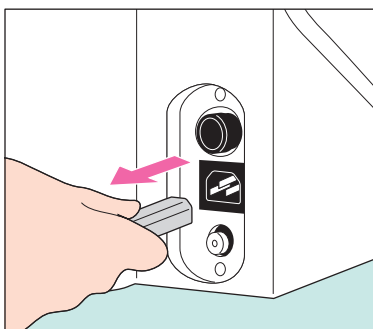

4 排水トレイのお湯を捨てる。

排水トレイを引き出して、お湯を捨てます。

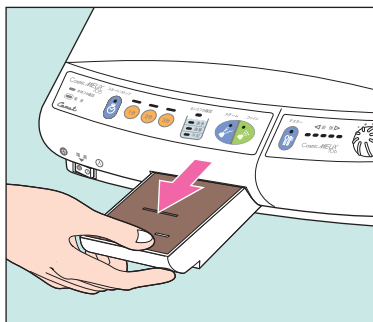

⚠ 注意

排水トレイのお湯を捨てる際は十分に注意してください。高温のためやけどをするおそれがあります。

設定変更

本器は「メロディー音量」、「ブザー音量(クリック音・警告音)」の設定変更が可能です。
なお、設定された内容は電源スイッチを「切」にしても記憶されています。

※設定前にタイマー・スチーム・赤外線がOFFになっていることを確認してください。

設定項目

3項目の変更が可能。

設定変更ができるのは、以下の3項目です。

- **メロディー音量** — タイマー設定時間の経過を知らせるメロディー音。
- **ブザー音量** —
 - 〈クリック音〉 スイッチを押したときに鳴るクリック音。
 - 〈警告音〉 誤った操作をした場合の警告音。


※ご購入時の設定は小音になっています。

使用するスイッチ

4種類のスイッチを使用。

設定変更には通常使用するタイマーの4種類のスイッチを使用します。

- 「スタート/ストップ」
- 「1分スイッチ」
- 「2分スイッチ」
- 「3分スイッチ」

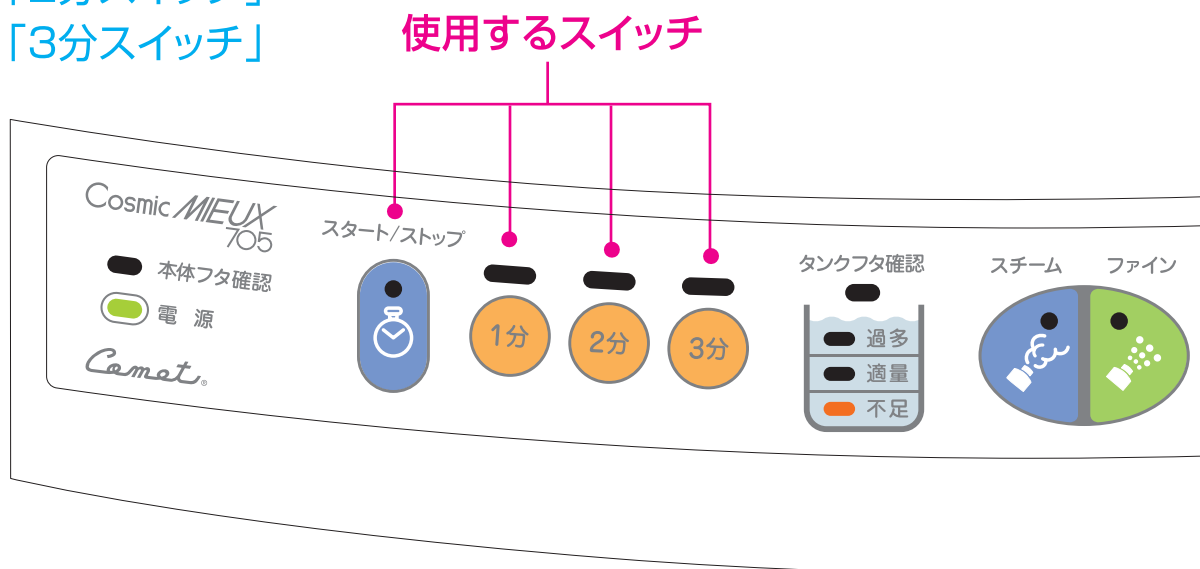

設定変更


ブザー音量

1 「スタート/ストップ」スイッチと「2分」「3分」スイッチを押す。

- ①「スタート/ストップスイッチ」を押します。
- ②「スタート/ストップスイッチ」を押した状態で、「2分」「3分」のスイッチを同時に1~2秒間押します。

〈「スタート/ストップ」「1分」「2分」「3分」のランプ点滅〉


※「スタート/ストップスイッチ」「2分」「3分」の3つのスイッチを同時に押さないでください。

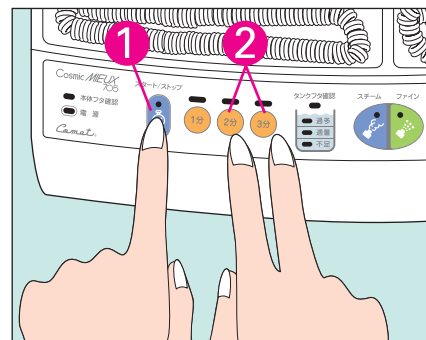

2 「2分」スイッチを押す。

「スタート/ストップ」「1分」「2分」「3分」のランプの点滅を確認したら、「2分」スイッチを押します。

〈現在設定されている音量のランプ点滅〉

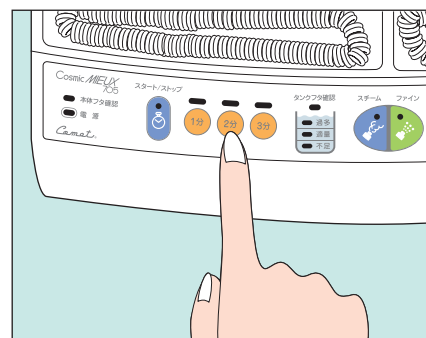


3 お好みの音量のスイッチを押す。

下記の3つの音量の中から、お好みの音量のスイッチを押します。


●無音…「1分」 ●小音…「2分」 ●大音…「3分」

〈変更された音量のブザー音が鳴り、設定したランプ点滅〉

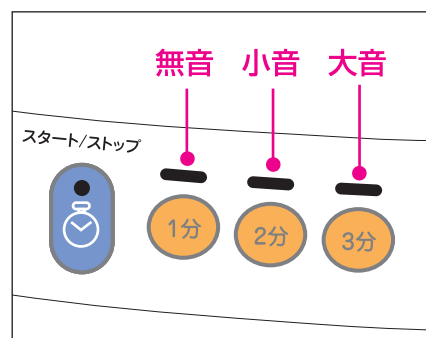

4 設定を決定する。

変更された音量でよろしければ、「スタート/ストップ」スイッチを押します。設定が決定され終了です。

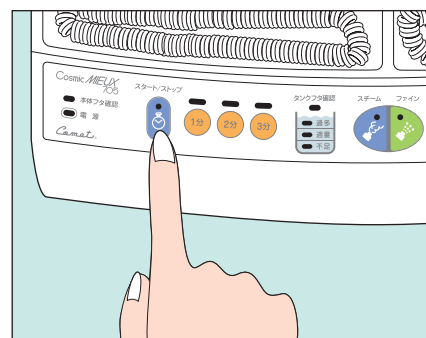


メロディー音量

1 「スタート/ストップ」スイッチと「2分」「3分」スイッチを押す。

- ①「スタート/ストップスイッチ」を押します。
- ②「スタート/ストップスイッチ」を押した状態で、「2分」「3分」のスイッチを同時に1~2秒間押します。

〈「スタート/ストップ」「1分」「2分」「3分」のランプ点滅〉


※「スタート/ストップスイッチ」「2分」「3分」の3つのスイッチを同時に押さないでください。

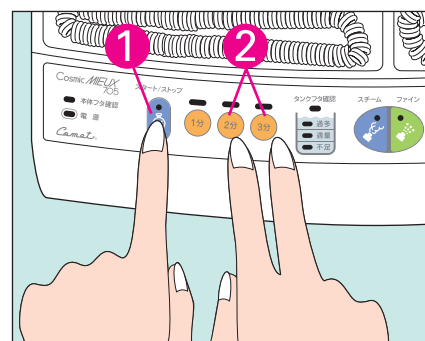

2 「1分」スイッチを押す。

「スタート/ストップ」「2分」「3分」のランプの点滅を確認したら、「1分」スイッチを押します。

〈現在設定されている音量のランプ点滅〉

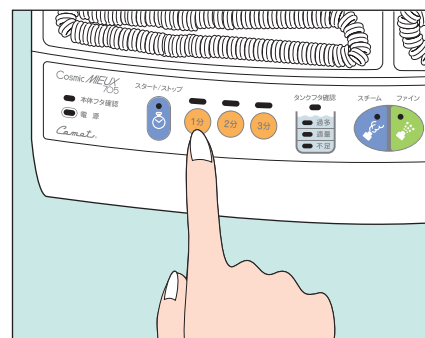


3 お好みの音量のスイッチを押す。

下記の3つの音量の中から、お好みの音量のスイッチを押します。


●無音…「1分」 ●小音…「2分」 ●大音…「3分」

〈変更された音量のメロディー音が鳴り、設定したランプ点滅〉

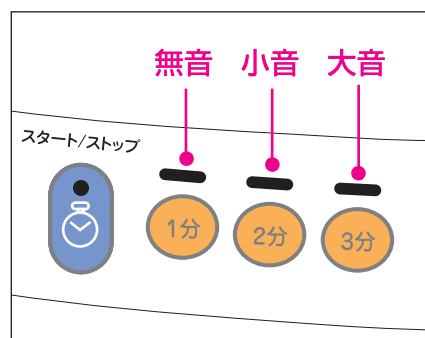

4 設定を決定する。

変更された音量でよろしければ、「スタート/ストップ」スイッチを押します。設定が決定され終了です。

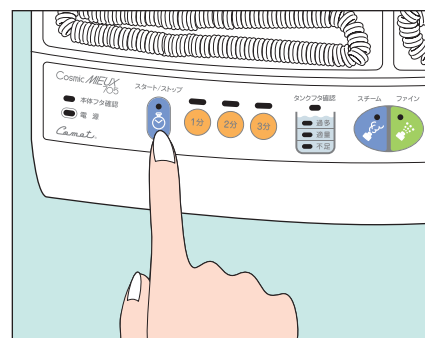

本器のお手入れ


各部のお手入れは次の方法で正しく行ってください。

お手入れは、必ず電源プラグを家庭用電源のコンセントから抜いて行ってください。

本体

柔らかい布で拭き取る。

本体のプラスチック部分の汚れは、ぬるま湯を含ませたやわらかい布で拭き取ってください。

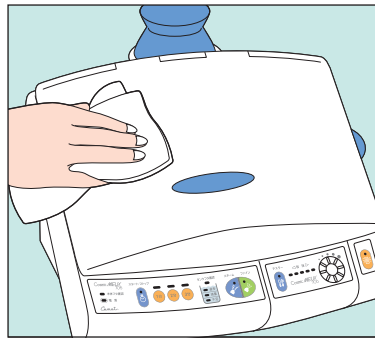


⚠ 注意

シンナーなどの揮発性の高いもの・みがき粉・たわし・熱湯などは使用しないでください。プラスチックが変質したり傷が付きます。

タンク内

タンク内の洗浄。

タンク内の水垢は1年に1~2回の割合で、コメット美顔器専用の「タンク洗浄剤」で洗浄してください。

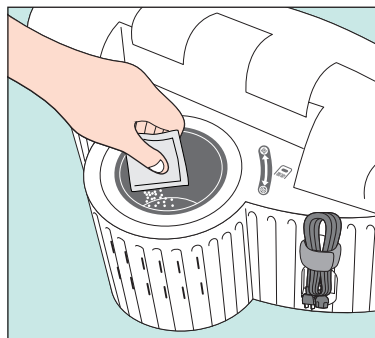

⚠ 注意



タンク内の洗浄は専用の「タンク洗浄剤」以外の洗剤などは使用しないでください。「タンク洗浄剤」をご使用の際は、洗浄剤の使用説明書に記載されている使用方法・注意事項をよくお読みの上正しくご使用ください。

クリーナー/吸引ゴム・スポンジ

使用後は毎回きれいにします。

クリーナー吸引ゴムは、ご使用後は毎回クリーナーから取り外し、汚れをやわらかな布やティッシュペーパーで拭き取るか、洗剤を使って洗ってください。

クリーナー吸引口内部にあるスポンジは、1カ月に1回の割合で、ピンセットなどで取り出して洗浄し、乾いた布などでよく水気を取ってから元に戻してください。

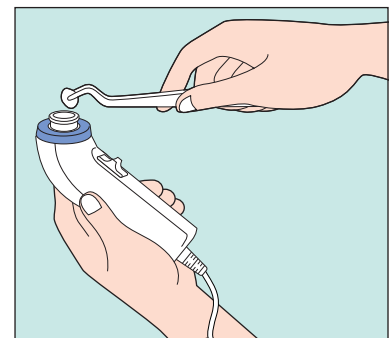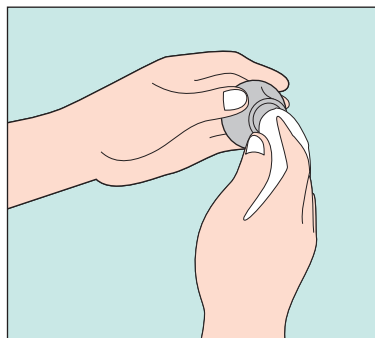

ヒューズ交換


ヒューズの交換は次の方法で正しく行ってください。

⚠ 警告 交換方法が記載されている部分以外の交換や、本器を改造しての使用は絶対に行わないでください。

⚠ 注意 ヒューズ交換は、必ず電源プラグを家庭用電源のコンセントから抜いて行ってください。


1 ヒューズホルダーをはずす。

本体のうしろ側右下 (P6.「705本体うしろ側」参照)にあるヒューズホルダーを、「+」ドライバーで左に回してはずします。

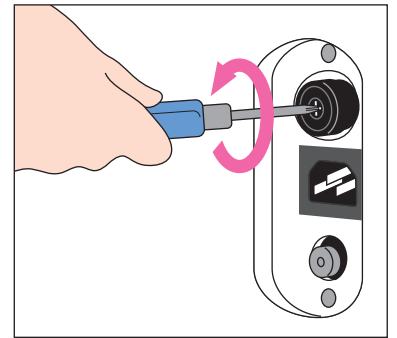


2 古いヒューズを取り出す。

ヒューズホルダーに差し込まれている古いヒューズを取り出します。

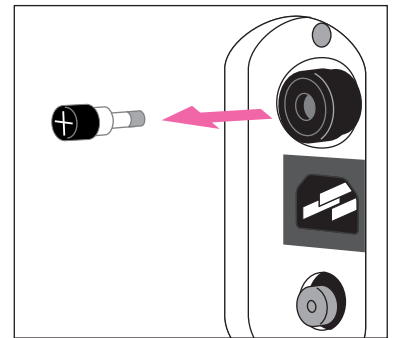

3 付属のヒューズと交換する。

付属の**コスミック ミュー**本体用 (7A)ヒューズと交換し、ヒューズホルダーを元のように締め付けます。

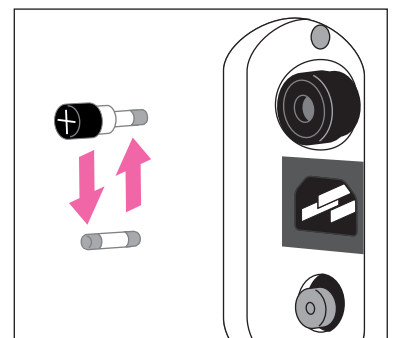

⚠ 注意

●付属の**7A**用ヒューズは**本器専用**です。他の機器には使わないでください。

その他

保管

日常の保管

■お子様の手に触れないように、各部品は所定の場所に正しく収納し、本体フタを閉じて付属の本体カバーをおかけください。

⚠ 注意

- お子様がガラス管を破損させたりして、けがをするおそれがありますので十分注意してください。
- 湿気の多い場所や直射日光の当たる場所はさけてください。

長期の保管

■1カ月以上(長期間)使用しないときは、タンク内の水分を乾いた布で十分拭き取り、「日常の保管」の注意事項を守って保管してください。

■本器保管中または保管において、落下したり水につかった場合はご使用を中止し、マシン フリーダイヤルへご相談の上、必ず点検にお出してください。

アフターサービス

■本器には保証書を添付しております。保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認の上、大切に保管してください。

■保証期間はお買い上げ日より3年間です。保証期間中は保証書の記載内容により、コメット電機株式会社が無償で修理いたします。

■保証期間経過後、修理によって機能が維持できる場合には、お客さまのご要望により有償修理をいたします。その他詳細につきましては保証書をご参照ください。保証期間経過後、または保証書を提示されない場合の修理などについてご不明な点は、マシン フリーダイヤルへご相談ください。

■ご愛用のお客さまへのアフターサービス充実のため、お客さまのデータを登録いたします。ご結婚・ご転居などにより登録内容に変更があった場合には、登録変更届に必要な事項をご記入の上ご投函ください。

点検

■本器を長年ご愛用されて、プラグやコードに傷や変形が生じたり、タンクの排水ができないなど、異常が認められた場合は、故障や事故防止のため使用を中止し、必ずマシン フリーダイヤルへ、点検についてご相談ください。

廃棄

■ガラス管を廃棄する際は、破損する恐れがありますので十分注意してください。

■コスミック ミュー本体を廃棄される場合には、マシン フリーダイヤルへご相談ください。

マシン フリーダイヤル

 0120-2171-00

仕様

コスミック ミュー705/706

形式	CosmicMIEUX705	CosmicMIEUX706
定格電圧	AC100V	AC24V
定格周波数	50/60Hz	50/60Hz
消費電力	ヒーター 380W ファイン 10W 赤外線 130W クリーナー(DC5V) 0.8W	テスラー 22W
外形寸法	幅38cm×奥行38cm×高さ27.5cm	
本体重量	8.9kg	
付属品	専用アイガード*/計量カップ/本体カバー/ケーブル/電源コード	

*専用アイガードは赤外線なしタイプには付属しません。

- この美顔器は日本国内での使用を前提として、国内の安全基準に基づいて設計・製造されており、海外各国での安全規格等の適用を受けておりません。よって、この美顔器の海外への持ち出しおよび海外でのご使用により生じた事故・損害等に対し、直接・間接を問わず一切の責任を免除させていただきます。

部品価格 (税込価格)

スプーン型ガラス管	¥3,500
クシ型ガラス管	¥4,200

- 仕様、価格、外観は予告なく変更することがありますのでご了承ください。